

KÄYTTÖOHJE

ReSound Unite™ Phone Clip+



ReSound



rediscover hearing

Johdanto

Onnittelut Phone Clip+ hankinnan johdosta.

Phone Clip+ mahdollistaa langatonta toimintoa tukevan ReSound-kuulokojeen yhdistämisen matkapuhelimiin, joissa on Bluetooth-toiminto. Sen ansiosta voit käyttää puhelinta helposti kotona, työpaikalla, tai ollessasi liikkeellä.

Lisäksi Phone Clip+ toimii perustason kaukosäätimenä. Voit säätää kuulokojeiden äänenvoimakkuutta ja vaihtaa kuunteluohjelmia, kun et puhu puhelimessa.

Voit myös mykistää kuulokojeen mikrofonin. Tämä toiminto sulkee pois ympäristön äänet kun puhut puhelimessa, tai kun käytät Phone Clip+ laitetta kaukosäätimenä (vain Verso-kuulokojeet langattomalla toiminnolla).

Tutustu käyttöohjeeseen huolellisesti, jotta saat parhaan hyödyn Phone Clip+ laitteestasi. Kysy tarvittaessa lisätietoja audionomilta.

Lisätietoja on osoitteessa <http://www.resound.com/products/accessories>.

Oman turvallisuutesi vuoksi lue luku Tärkeitä tietoja sivuilta 25-31.

FCC ID: X26BTB-2

Ilmoitus:

Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen.

Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) laitteen on kestettävä mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Huomautus: Tämä laite on testattu, ja sen on todettu täyttävän FCC:n sääntöjen osassa 15 annetut luokan B digitaalilaitteisiin sovellettavat raja-arvot. Raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan riittävä suoja haitallisilta häiriöiltä asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriötä radioyhteyksiin.

Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny yksittäisissä tapauksissa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-lähetysten vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laitteen virta vuoronperään pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanottava antenni toisaalle tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai radio-/tv-huollosta.

Käyttäjältä voidaan evätä oikeus käyttää laitetta, jos siihen on tehty muutoksia.

Käyttötarkoitus

Phone Clip+ helpottaa puhelinkeskustelujen käymistä kun käytetään langatonta toimintoa tukevia ReSound-kuulokojeita. Phone Clip+ välittää signaaleita Bluetooth-toiminnolla varustetun puhelimen ja ReSound-kuulokojeen välillä.

Lisäksi Phone Clip+ toimii perustason kaukosäätimenä, jolla voit säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa kuunteluohjelmia ja mykistää kuulokojeen mikrofonin*, kun et puhu puhelimessa.

Maakohtaiset tiedot:

Tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan talousalueella ja Sveitsissä.

*Vain Verso-kuulokojeet langattomalla toiminnolla.

Maakohtaiset rajoitukset:

Norja: Laitetta ei saa käyttää 20 kilometrin säteellä Ny Ålesundin keskustasta.

Tuotteet noudattavat seuraavia säädöksiä:

EU-maat: Laite täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY liitteen I olennaiset vaatimukset ja direktiivin 1999/5/EY (radio- ja telepäätelaitteet) olennaiset vaatimukset ja säännöt. Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen voi tutustua osoitteessa www.resound.com.

Yhdysvallat: FCC CFR 47, luku 15, osa C, kohta 15.247 ja 15.249.

Muut aiheeseen liittyvät kansainväliset lakisäätteiset vaatimukset muualla kuin EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Tutustu näiden alueiden maakohtaisiin vaatimuksiin.

Laite on luokiteltu luokan 2 vastaanottimeksi EN 300 440 -standardin mukaisesti.

iC: 6941C-BTB2

Tämä luokan B digitaalilaitte noudattaa Kanadan ICES-003-määräystä.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Käyttö edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä: (1) laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) laitteen on kestettävä mahdolliset

häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

Japani:


Japanin sisä- ja viestintäministeriö on antanut laitteelle lupanumeron radiolaitteiden teknistä vaatimustenmukaisuustodistusta koskevan asetuksen mukaisesti (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則), artikla 2-1-xx "Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia. Muutoin myönnetty lupanumero raukeaa."

Sisältö


Kuvaus	8
Käytön aloittaminen	10
Virran kytkeminen päälle/pois päältä	11
Bluetooth-paritus	13
Puhelimen käyttäminen.	16
Äänenvoimakkuuden säätäminen.	20
Käyttöaika.	21
Phone Clip+ laitteen kiinnittäminen.	21
Merkkivalot	22
Perustietoja Bluetooth-tekniikasta.	23
Tärkeitä tietoja.	25
Tekniset tiedot.	32
Takuu	33
Vianhakuopas	36

Kuvaus

1. Virtakatkaisin
2. Vastaus- ja lopetuspainike
3. Kuulokojeen ohjelman vaihtaminen
4. Kuulokojeen mikrofonin mykistyspainike
5. Pienois-USB-liitäntä lataamista varten

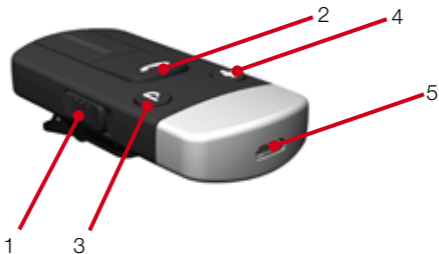

6. Äänenvoimakkuudensäädin
7. Mikrofoniliitäntä
8. Kiinnitysklipsi
9. Kuulokojeparituksen painike
10. Bluetooth-parituksen painike

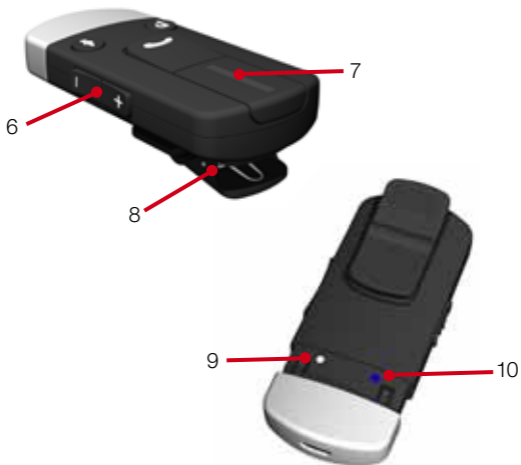

Käytön aloittaminen

Akun lataaminen

Akku on ladattava täyteen ennen Phone Clip+ laitteen käytön aloittamista.

Lataa akku työntämällä latausliitin Phone Clip+ laitteeseen oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvällä tavalla.

Työnnä latausjohdon pistoke sähköpistorasiaan.

Kun akkua ladataan, Phone Clip+ laitteen merkkivalo palaa punaisena.

Kun akku on ladattu täyteen ja latausliitin on yhdistettynä, merkkivalo palaa vihreänä ja välähtää punaisena 2 sekunnin välein.

Tyhjän akun latautuminen täyteen kestää yleensä noin 3 tuntia. Latausliittimen voi jättää paikalleen yöksi. Akkua ei voi ladata liikaa.

- Kun lataat Phone Clip+ laitteen ensimmäistä kertaa, anna sen latautua vähintään 3 tuntia, vaikka merkkivalo ilmaisisi, että se on ladattu täyteen. Lisätietoja on kohdassa Merkkivalot.
- Lataa akku turvallisuussyistä vain ReSoundin toimittamalla laturilla.





Älä lataa ReSound Unite Phone Clip+ laitetta, kun pidät sitä ylläsi.

Virran kytkeminen päälle/pois päältä

Voit käynnistää Phone Clip+ laitteen siirtämällä virtakatkaisimen (sivu 8, 1) ON-asentoon. Katkaisimen pohjassa näkyy valkoinen I-kuvake, ja merkkivalo välähtää vihreänä 2,5 sekunnin välein.

Voit katkaista virran siirtämällä virtakatkaisimen OFF-asentoon. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

Jos akun varaus on ehtymässä, merkkivalo välähtää keltaisena 2 sekunnin välein. Akku on tällöin ladattava.

Kuulokojeparitus 

Huomautus! Seuraavat tiedot on tarkoitettu lähinnä audionomi-asi varten. Useimmissa tapauksissa hän tekee tarvittavat toimet, jotta Phone Clip+ toimii yhdessä kuulokojeittesi kanssa. Paritus on kuitenkin helppo tehdä, joten lähes kaikki suoriutuvat siitä.

1. Varmista, että Phone Clip+ laitteeseen on kytketty virta. Kuulokojeista on katkaistava virta avaamalla paristokotelon.

2. Irrota Phone Clip+ laitteen hopeanvärinen kansi. Paina kynän kärjellä tai muulla vastaavalla esineellä Phone Clip+ laitteen takaosassa näkyvää parituspainiketta oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvällä tavalla. Merkkivalo välähtää keltaisena 2 sekunnin välein merkinä siitä, että paritus kuulokojeiden kanssa on mahdollista. Phone Clip+ jää paritustilaan 20 sekunniksi.
3. Kun paritustila on käytössä, sulje molempien kuulokojeiden paristokotelot ja varmista, että niihin on kytketty virta. Kun laiteparit on muodostettu, molemmista kuulokojeista kuuluu äänimerkki. Lisäksi Phone Clip+ laitteen merkkivalo palaa keltaisena 2 sekunnin ajan.



Bluetooth-paritus

Jos matkapuhelimessasi on Bluetooth ja tarvittava profiilituki, sen voi parittaa Phone Clip+ laitteen kanssa. Parituksen jälkeen laitteet pitää vielä yhdistää, ennen kuin ne voivat viestiä keskenään.

Parituksen avulla voit määrittää, mitkä Bluetooth-laitteet saavat olla yhteydessä keskenään. Joudut parittamaan kaikki Phone Clip+ laitteen kanssa käytettävät laitteet vain kerran.

Voit parittaa enintään 8 Bluetooth-laitetta Phone Clip+ laitteeseen, mutta siihen voi olla yhdistettynä vain 2 Bluetooth-laitetta kerrallaan.

Paritus kuvataan seuraavassa luvussa. Kun matkapuhelimen sallitaan olla yhteydessä Phone Clip+ laitteeseen parittamalla ne, se lähettää ääntä Bluetooth-yhteyden avulla. Tämäkin kuvataan seuraavassa luvussa.

Matkapuhelinparitus

Paritus tehdään matkapuhelimella. Erilaisissa matkapuhelinmal-
leissa on erilaiset valikot. Jos paritus ei onnistu noudattamalla yleisiä ohjeita, katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeesta.

1. Käynnistä Phone Clip+ ja irrota sen hopeanvärinen kansi.

Aseta matkapuhelin Phone Clip+ laitteen viereen ja varmista, että puhelimeen on kytketty virta.

2. Siirry puhelimen valikossa sen yhteysasetuksiin. Paikanna Bluetooth-ominaisuus päävalikosta tai esimerkiksi Yhteydet-alivalikosta.
3. Varmista, että matkapuhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
4. Paina kynän kärjellä tai vastaavalla esineellä Phone Clip+ laitteen takaosassa näkyvää Bluetooth-parituspainiketta kuvassa näkyvällä tavalla. Phone Clip+ jää Bluetooth-paritus-tilaan 2 minuutiksi.
5. Valitse matkapuhelimessa Bluetooth-laitteiden etsiminen.
6. Matkapuhelin tuo näkyviin luettelon löytämistään Bluetooth-laitteista. Valitse luettelosta Hearing Aid Phone (Kuulokojepuhelin) -vaihtoehto.
7. Matkapuhelin voi pyytää syöttämään tunnusluvun. Jos näin tapahtuu, syötä 0000 (neljä nollaa).




Phone Clip+ laite paritetaan nyt matkapuhelimeen. Jotkut matkapuhelimet saattavat kysyä, mikä Bluetooth-palvelu otetaan käyttöön. Valitse Kuuloke-vaihtoehto.

Yhdistäminen

Kun matkapuhelin ja Phone Clip+ on paritettu, matkapuhelin pitää mahdollisesti vielä erikseen yhdistää, jotta äänen lähettäminen onnistuu.

Tämä toiminto näkyy yleensä matkapuhelimen Bluetooth-valikossa, yleensä Laiteparit-luettelossa. Valitse Phone Clip+ tästä luettelosta ja valitse Yhdistä-vaihtoehto.

Kun Phone Clip+ ja matkapuhelin on yhdistetty toisiinsa, puhelimen näytössä voi näkyä kuulokesymboli, esimerkiksi .

Phone Clip+ laitteen ja matkapuhelimen välinen yhteys pysyy käytössä niin kauan kuin molempiin laitteisiin on kytketty virta ja ne ovat toistensa kantoalueella. Jos toinen laite siirretään kantaman ulkopuolelle tai siitä katkaistaan virta, yhdistämistoimet on ehkä tehtävä uudelleen.

Joissakin puhelimissa voidaan ottaa käyttöön automaattinen uudelleen yhdistäminen. Jos sellainen on olemassa, on suositeltavaa ottaa se käyttöön. Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöohjeessa.

Puhelimen käyttäminen

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja Phone Clip+ laitteen käyttämisestä puheluiden aikana.

Puhelimeen vastaa- minen ja puhelun lopettaminen	Paina vastaus- ja lopetuspainiketta kerran.
Puhelun hylkääminen	Paina vastaus- ja lopetuspainiketta kaksi kertaa.
Matkapuhelimella vastatun puhelun siirtäminen Phone Clip+ laitteeseen	Paina vastaus- ja lopetuspainiketta kerran.
Meneillään olevan puhelun siirtäminen pitoon	Pidä vastaus- ja lopetuspainiketta painettuna 2 sekuntia.
Soittaminen viimeksi valittuun numeroon	Paina vastaus- ja lopetuspainiketta kaksi kertaa, kun meneillään ei ole puhelua eikä puhelu koputa.

Huomautus: Puhelimeen vastaamista ja puhelun lopettamista lukuun ottamatta edellä kuvatut toiminnot voivat vaihdella puhelinmallikohtaisesti tai puuttua.

Jos meneillään on jo puhelu, se katkaistaan ja saapuvaan (koputtavaan) puheluun vastataan.


Jos pidossa on toinen puhelu, siitä tulee aktiivinen.

Jos meneillään on jo puhelu, sitä ei katkaista. Uuteen saapuvaan (koputtavaan) puheluun ei vastata.

Jos pidossa on toinen puhelu tai uusi puhelu koputtaa, siitä tulee aktiivinen.

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, tämä toiminto kohdistuu matkapuhelimeen, joka paritettiin viimeksi.



<p>Numeron valitseminen äänikomentojen avulla</p>	<p>Pidä vastaus- ja lopetuspainiketta painettuna 2 sekuntia.</p>
<p>Keskustelukumppanin kuuleman äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen</p>	<p>Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla Phone Clip+ laitteen pluspainiketta.</p> <p>Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla Phone Clip+ laitteen miinuspainiketta.</p>
<p>Kuulokojeen mikrofonien mykistysen aktivoiminen / poistaminen puhelun aikana</p>	<p>Paina Phone Clip+ laitteen etuosassa näkyvää mikrofonin mykistys- / mykistysen poistopainiketta .</p>

Jos laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta, tämä toiminto tehdään matkapuhelimessa, joka paritettiin viimeksi.

Tämä toiminto edellyttää, että Bluetooth-puhelimessa on käytössä numerovalinta äänikomennolla.

Tämä toiminto on käytettävissä vain yhdessä langatonta toimintoa tukevien Verso-kuulokojeiden kanssa.

Kaukosäätimenä käyttäminen

Phone Clip+ toimii kuulokojeiden* kaukosäätimenä, kun et puhu puhelimessa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuulokojeiden äänenvoimakkuuden lisääminen

Voit lisätä kuulokojeiden äänenvoimakkuutta painamalla Phone Clip+ laitteen pluspainiketta (sivu 9, 6).

Kuulokojeiden äänenvoimakkuuden vähentäminen

Voit vähentää kuulokojeiden äänenvoimakkuutta painamalla Phone Clip+ laitteen miinuspainiketta (sivu 9, 6).

Joissakin puhelimissa voit käyttää myös puhelimen äänenvoimakkuuden säädintä.

Jos käytössä on kaksi kuulokojetta, äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin samanaikaisesti.

Kuulokojeiden mikrofoniin mykistäminen/myksistyksen poistaminen (vain Verso-kuulokojeet langattomalla toiminnolla)

Voit mykistää kuulokojeittesi mikrofonit painamalla Phone Clip+

*Käytettäessä Alera-kuulokojeita langattomalla toiminnolla: Alera-kuulokojeet on ensin paritettava ReSound Unite Kauko-ohjaimen kanssa (asiakkaan tai jälleenmyyjän laite), jotta niitä voidaan säätää Phone Clip+ laitteella.

laitteen etuosassa näkyvää mikrofonin mykistys- / mykistyksen poistopainiketta (sivu 8, 4).

Voit poistaa kuulokojeittesi mikrofonien mykistyksen painamalla Phone Clip+ laitteen etuosassa näkyvää mikrofonin mykistys- / mykistyksen poistopainiketta (sivu 8, 4).

Kuulokojeen ohjelman vaihtaminen

Voit vaihtaa kuulokojeiden kuunteluohjelmia painamalla Phone Clip+ laitteen ohjelmapainiketta (sivu 8, 3).

Käyttöaika

Phone Clip+ laitteen akun kesto ja samalla laitteen käyttöaika vaihtelee laitteen käytön mukaan.

Phone Clip+ laitteen akku voidaan ladata satoja kertoja. Jos käyttöaika vähenee merkittävästi, ota yhteys audioniin.








Phone Clip+ laitteen kiinnittäminen

Kiinnitä Phone Clip+ esimerkiksi villapaitaan, takkiin tai muuhun vaatteeseen siten, että mikrofoniaukko (sivu 9, 7) osoittaa ylöspäin. Näin varmistat, että Phone Clip+ mikrofonit poimivat äänesi puhelinkeskustelun aikana. Kiitos kiinnitysklipsin voit aina asentaa Phone Clip+ laitteen siten, että mikrofoniaukko osoittaa suutasi kohden.

Keskustelukumppanisi kuulee äänesi parhaiten, kun mikrofoni on 10-30 cm:n päässä suustasi.

Merkkivalot

Phone Clip+ laitteen merkkivalo toimii monipuolisena käyttöliittymänä, joka antaa tietoja laitteen tilasta.

Välähdys	Merkitys
	Normaali toiminta
	Akun varaus vähissä
	Akkua ladataan
	Akku on ladattu täyteen, latauslaite yhä yhdistetty.
	Valmis kuulokojeparitukseen
	Valmis Bluetooth-paritukseen
	Bluetooth-puhelu meneillään

Perustietoja Bluetooth-tekniikasta

Mikä Bluetooth on?

Bluetooth mahdollistaa yhteyden muodostamisen esimerkiksi matkapuhelimiin.

Tarkista ensin, onko käyttämässäsi puhelimessa Bluetooth-toiminto. Katso, näkyykö laitteessa tai sen käyttöohjeessa seuraava symboli:



Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa on erilaisia profiileja eli käyttömahdollisuuksia. Yhdessä Phone Clip+ laitteen kanssa käytettävässä laitteessa tulee olla tarvittavat Bluetooth-profiilit.

Jotta voidaan soittaa ja vastata puheluihin, matkapuhelimesta tulee olla handsfree- tai kuulokeprofiili. Useissa muttei kaikissa matkapuhelimeissa on tällaiset Bluetooth-profiilit. Katso lisätietoja matkapuhelimesi käyttöohjeesta.

Bluetooth-kantomatka

Jos laitteiden välillä ei ole esteitä, Phone Clip+ ylläpitää Bluetooth-yhteyttä noin 10 metrin päähän. Laitteiden välillä ei

tarvitse olla näköyhteyttä. Seuraavat seikat voivat vaikuttaa kantomatkan pituuteen:

- Mahdolliset ympäristön häiriöt
- Matkapuhelin voi rajoittaa kantomatkan alle 10 metriksi.

Jos matkapuhelin siirretään kantomatkan ulkopuolelle, yhteys katkeaa. Jos se tuodaan takaisin Phone Clip+ laitteen lähelle, yhteys yritetään palauttaa. Yhteyden palauttamisen onnistuminen määräytyy sen mukaan, kuinka pitkään yhteys oli katkenneena ja matkapuhelimen ominaisuuksien mukaan.

Tärkeitä tietoja



Hoito-ohjeet

- Puhdista ReSound Unite Phone Clip+ kostealla liinalla. Älä puhdista sitä esimerkiksi pesujauhetta, saippuaa tai alkoholia käyttäen.
- Kun ReSound Unite Phone Clip+ ei ole käytössä, katkaise siitä virta ja säilytä sitä turallisessa paikassa.
- Suojaa ReSound Unite Phone Clip+ liialliselta kosteudelta ja kuumuudelta. Älä käytä sitä kylvyssä tai uudessa, äläkä jätä sitä lämmittimen lähelle tai auton tuulilasin viereen. Älä altista sitä voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Suojaa mikrofoniaukot ja latausliitäntä liialta ja roskilta. Voit puhdistaa ne tarvittaessa kuulokojeen mukana toimitetulla puhdistusharjalla.

Yleiset varoitukset



- Pidä tämä laite lasten ulottumattomissa.
- ReSound Unite Phone Clip+ on yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin heikkotehoisten digitaalisesti koodattujen lähetysten avulla. Tällä saattaa olla vaikutusta lähellä oleviin elektroniikkalaitteisiin, mutta se on epätodennäköistä. Jos näin käy, siirrä ReSound Unite Phone Clip+ kauemmas laitteesta, johon se vaikuttaa.
- Jos sähkömagneettiset häiriöt vaikuttavat ReSound Unite

Phone Clip+ laitteeseen, siirry kauemmas häiriöiden lähteestä.

- Vältä altistamasta laitetta sateelle, kosteudelle ja nesteille, jotta se ei vaurioidu etkä altistu henkilövahingoille.
- Pidä laite ja mahdolliset johdot kaukana toiminnassa olevista koneista.
- Jos laite ylikuumenee, putoaa tai vaurioituu, jos sen johto tai liitin vaurioituu tai laite on pudonnut nesteeseen, lopeta laitteen käyttäminen ja ota yhteys audioniin.
- Hävitä laite paikallisten määräyksien mukaan.
- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.

Syttymisvaara

- Älä käytä laitetta paikoissa, joissa voi olla syttymisen vaara tai syttyviä kaasuja.

Yleiset varotoimet

- Älä käytä tätä laitetta paikoissa, joissa elektronisten laitteiden käyttäminen on kielletty.
- Röntgensäteily (esimerkiksi tietokonetomografia tai magneettikuvantaminen) voi haitata tämän laitteen toimintaa. On suositeltavaa katkaista laitteesta virta ennen röntgentutkimuksen alkamista ja jättää laite toiseen huoneeseen.
- Suuritehoiset sähkölaitteet, suuremmat sähköasennukset ja metallirakenteet voivat lyhentää kantomatkaa huomattavasti.
- Jos häiriöt vaikuttava kuulokojeen ja laitteen väliseen yhteyteen, siirry kauemmas häiriölähteestä.
- Sovituksessa kuulokojeeseesi ja tähän laitteeseen on ohjelmoitu yksilöllinen viestintäkoodi. Tämän koodin avulla varmistetaan, että laite ei vaikuta muiden käyttämiin kuulokojeisiin.
- Älä tee laitteeseen mitään muutoksia.
- Jos ReSound Unite Phone Clip+ avataan, se voi vaurioitua. Jos kohtaat ongelmia, joita et pysty ratkaisemaan, ota yhteys audioniiniin.
- ReSound Unite Phone Clip+ laitteen saa korjauttaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Älä käytä Phone Clip+ laitetta paikoissa, joissa ei saa käyttää radiolähettäjiä, kuten lentokoneissa.

- Muodosta Phone Clip+ laitteen avulla vain yhteyksiä, joihin se on tarkoitettu.

SISÄISEN AKUN HOITO-OHJEET:

Jos laitteessa on akku, ota huomioon seuraavat seikat.

- Laite saa virtaa ladattavasta akusta.
- Uusi akku toimii täydellä teholla vasta 2-3 lataamis- ja tyhjentämiskerran jälkeen.
- Akku voidaan ladata ja tyhjentää satoja kertoja, mutta se tulee lopulta elinkaarensa päähän.
- Irrota laturi sähköpistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.
- Täyteen ladattu akku tyhjenee vähitellen, vaikka sitä ei käytetä.
- Jos laite jätetään esimerkiksi kuumaan autoon kesällä, akun kapasiteetti heikkenee ja käyttöikä lyhenee.
- Jos akku on kylmä, laite ei ehkä toimi vaikka akku olisi ladattu täyteen. Akun teho heikkenee pakkasella.


Akkuvaroitus!



- Varoitus: Akun väärinkäytöstä voi aiheutua tulipalon tai kemikaalipalon vaara.
- Älä yritä avata laitetta tai vaihtaa akkua. Sisäistä akkua ei voi vaihtaa. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran. Lisäksi takuu raukeaa.
- Käyttäjä ei voi irrottaa eikä vaihtaa akkua. Yritys vaihtaa akkua on vaarallista ja saattaa vaurioittaa laitetta.
- Lataa ReSound Unite Phone Clip+ vain sen mukana toimitetun virtalähteen avulla.
- Hävitä akut paikallisten määräyksien mukaan. Jos mahdollista, toimita laite ja akku kierrätykseen.
- Älä hävitä akkua talousjätteenä tai polttamalla, sillä se voi räjähtää.
- Jos akku vaurioituu, se voi räjähtää.

LATURIN HOITO-OHJEET:  *Jos laitteen mukana on toimitettu laturi, ota seuraavat seikat huomioon.*

- Älä yritä ladata laitteen akkua muulla kuin sen mukana toimitetulla laturilla. Muunlaisten laturien käyttäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vaaratilanteita. Muiden laturien käyttäminen voi aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Kysy audionomilta, mitä hyväksytyjä varaosia on saatavana.
- Lataa laite sen mukana toimitettuja ohjeita noudattaen.

Laturivaroitus! 

- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Älä käytä vaurioitunutta laturia.
- Älä yritä purkaa laturia. Muutoin voit saada sähköiskun.
- Jos laturi kootaan väärin, seuraavalla käyttökerralla voi aiheutua sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Vältä lataamasta laitetta kuumassa tai kylmässä. Älä käytä laturia ulkona tai kosteissa paikoissa.
- Älä lataa ReSound Unite Phone Clip+ laitetta, kun pidät sitä ylläsi.

Tekniset tiedot

Kantomatka:	Enintään 3 metriä
Langaton yhteys:	2,4 GHz
Käyttölämpötila:	0 - 45 °C
Latauslämpötila:	0 - 45 °C
Säilytyslämpötila:	-20 - 45 °C

Lämpötilatestaukset, kuljetus- ja säilytystiedot

Tuotteille tehdään erilaisia testejä kosteissa olosuhteissa ja lämpötiloissa asteikolla -25 - +70 °C yrityksen sisäisten ja alan standardien mukaisesti.

Takuu

ReSound Unite Phone Clip+ laitteella on valmistajan myöntämä takuu, joka on voimassa 12 kuukautta laitteen alkuperäisestä ostopäivästä. Huomaa, että joissain maissa voi olla voimassa laajennettu takuu. Saat lisätietoja audionomilta.

Mitä takuu kattaa?

Kaikki elektroniset osat, jotka eivät toimi kunnolla valmistus- tai suunnitteluvirheen vuoksi normaalissa käytössä, vaihdetaan veloittamatta osista tai työstä, kun laite palautetaan ostopaikkaan.

Jos laitetta ei voi korjata, se voidaan vaihtaa vastaavaan laitteeseen, jos audionomi ja asiakas yhdessä sopivat asiasta.

Mitä takuu ei kata?

Takuu EI kata huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, liiallisesta käyttämisestä, onnettomuudesta tai valtuuttamattoman henkilön tekemästä korjauksesta aiheutuvia ongelmia. Tällöin takuu voi raueta. Takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön suomiin kuluttajan oikeuksiin. Audionomi on voinut myöntää tätä rajoitettua takuuta laajemman takuun. Kysy lisätietoja audionomilta.

Sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

VIANHAKUOPAS

ONGELMA

Kun vastaus- ja lopetus-painiketta painetaan pitkään tai lyhyesti, Phone Clip+ ei reagoi.

Phone Clip+ laitteen parituspainiketta painetaan, mutta kuulokojeesta ei kuulu parituksen merkkiääntä, kun paristokotelo suljetaan.

Phone Clip+ laitetta ei näy matkapuhelimen Bluetooth-valikossa.

SYY

Phone Clip+ laitteen akku on tyhjentynyt.

Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä ei ole langatonta yhteyttä.

Phone Clip+ ja kuulokoje eivät olleet paritustilassa samanaikaisesti.

Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä ei ole langatonta yhteyttä.

Phone Clip+ ei ole Bluetooth-paritustilassa.

MAHDOLLINEN KORJAUSTOIMENPIDE

Lataa akku.

Varmista, että Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä on langaton yhteys ja suorita paritus uudelleen.

Suorita paritus uudelleen. Varmista, että molempien kuulokojeiden paristokotelot suljetaan 20 sekunnin kuluessa siitä, kun Phone Clip+ laitteen parituspainiketta on painettu.

Varmista, että Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä on langaton yhteys ja suorita Bluetooth-paritus uudelleen.

Phone Clip+ jää Bluetooth-paritustilaan 2 minuutiksi, kun tämä tila on otettu käyttöön. Toista Bluetooth-paritus.

VIANHAKUOPAS

ONGELMA

Bluetooth-paritus epäonnistui.

Matkapuhelin soi mutta Phone Clip+ merkkivalo ei vilku eikä kuulokojeista kuulu soittoaäntä.

SYY

Phone Clip+ poistui Bluetooth-paritustilasta ennen kuin matkapuhelin muodosti laiteparin.

On syötetty virheellinen nelinumeroinen PIN-koodi.

Phone Clip+ laitteesta on katkaistu virta.

Phone Clip+ laitetta ja matkapuhelinta ei ole paritettu.

Phone Clip+ laitteen ja matkapuhelimen välinen Bluetooth-yhteys on katkenut.

MAHDOLLINEN KORJAUSTOIMENPIDE

Toista Bluetooth-paritus. Tee toimet 2 minuutin kuluessa siitä, kun paritustila on aktivoitu Phone Clip+ laitteessa.

Toista Bluetooth-paritus. Jos pyydetään PIN-koodia, syötä 0000 (neljä nollaa).

Kytke virta Phone Clip+ laitteeseen.

Toista Bluetooth-paritus, jotta Phone Clip+ laitteen ja matkapuhelimen välille muodostuu Bluetooth-yhteys.

Varmista, että Bluetooth on käytössä matkapuhelimessa. Muodosta Phone Clip+ laitteen ja matkapuhelimen välille Bluetooth-yhteys uudelleen painamalla Phone Clip+ laitteen monitoimipainiketta.

Bluetooth-toiminnosta on lisätietoja matkapuhelimen käyttöohjeessa.

VIANHAKUOPAS

ONGELMA

SYY

Matkapuhelin soi ja Phone Clip+ laitteen merkkivalo vilkkuu, mutta yhdestä kuulokojeesta tai molemmista ei kuulu soittoaäntä.

Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä ei ole langatonta yhteyttä.

Kuulokojeen paristossa on niin vähän virtaa, ettei äänen lähettäminen ole mahdollista.

Keskustelukumppani ei kuule ääntäni selkeästi.

Phone Clip+ mikrofoni ei poimi ääntäsi oikein.

Ääni kuuluu kuulokojeista liian voimakkaana tai hiljaisena.

Äänenvoimakkuus on säädetty väärin.

*Kuulokojeista ei kuulu ääntä, vaikka käytössä on puhe-
linohjelma.*

Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeiden välillä ei ole langatonta yhteyttä.

MAHDOLLINEN KORJAUSTOIMENPIDE

Varmista, että Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeen välillä on langaton yhteys.

Vaihda kuulokojeen paristo.

Varmista, että Phone Clip+ mikrofoni on lähellä suutasi ja että Phone Clip+ ei hankaa vaatteisiin puhelun aikana.

Säädä matkapuhelimen äänenvoimakkuutta tai säädä äänenvoimakkuutta Phone Clip+ laitteen plus- ja miinuspainikkeiden avulla.

Voit myös käyttää Unite Kauko-ohjaimen plus- ja miinuspainikkeita.

Varmista, että Phone Clip+ laitteen ja kuulokojeiden välillä on langaton yhteys.

Huomaa varoitusmerkillä merkityt tiedot.



VAROITUS osoittaa tilannetta, joka voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

HUOMIO osoittaa tilannetta, joka voi johtaa lieviin ja keskisuuriin henkilövahinkoihin.



Neuvoja ja vinkkejä ReSound Unite -laitteen parempaan käsittelyyn



Laitteessa on radiotaajuuslähetin.



Tuote on tyyppin B sovellettu osa.



"Made for iPhone" merkitsee, että laite on suunniteltu iPhone-yhteensopivaksi ja että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuusmääräykset. Huomaa, että tämän laitteen käyttäminen yhdessä iPhone'n kanssa voi vaikuttaa langattoman yhteyden laatuun.



Pyydä audionomilta neuvoja ReSound Unite -lisälaitteen hävittämisestä.



Kaikki kysymykset koskien EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY ja R&TTE-direktiiviä 1999/5/ETY tulee osoittaa englanniksi GN ReSound A/S yhtiölle, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Tanska.

Maailmanlaajuinen pääkonttori

ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Tanska

Puh: +45 4575 1111

Faksi: +45 4575 1119

www.resound.com

Y-tunnus 55082715

Suomi

GN ReSound Finland Oy/Ab

PL 7 (Koronakatu 1B)

FIN-02211 Espoo

Puh: (09) 4777 9700

Faksi: (09) 4777 9777

kuulo@gnresound.com

www.gnresound.fi

ReSound



rediscover hearing