



ReSound GN

ReSound Smart 3D™
-sovelluksen langattomien
yhteyksien opas





Sisältö

Yhteensopivuus: Kuulokojeet ja mobiililaitteet	4
---	----------

Aloittaminen iPhoneissa, iPadissä tai iPod touchissa	6
---	----------

iPhonen, iPadin tai iPod touchin parittaminen kuulokojeiden kanssa	6
Äänen siirtäminen ReSound Smart Hearing -kuulokojeisiin	10
Äänen reititys	12
Kuulokojeiden ohjaaminen iPhoneen, iPadin tai iPod touchin avulla (kolmoisnapsautus).....	14

ReSound Smart 3D-sovellus	17
--	-----------

Sovelluksen lataaminen ja yhdistäminen Apple- tai Android-laitteeseen	17
ReSound Smart 3D-sovelluksen yleiskatsaus	20

Aloitusruutu:	
Ohjelman vaihtaminen.....	22

Äänenvoimakkuuden säätö	23
Pikapainikkeet.....	25
Sound Enhancer	26
Tinnituksen hallinta	30
Suosikit	32

Yhteydet:	
Yhteys ja pariston tila	34

Oma ReSound:	
ReSound Assist.....	36
Opastavia vinkkejä	44
Sovellukseen tutustuminen	45
Etsi kuulokojeeni	46

Lisää:	
Sovelluksen lisävaihtoehtot	47
ReSound Smart 3D-sovellus Apple Watchille	48

Äänen siirtäminen	
Android-puhelimesta kuulokojeisiin	52
Tutustu muihin ReSound-sovelluksiin ...	54

Yhteensopivat ReSound Smart Hearing -kuulokojeet

Tässä on luettelo ReSound Smart Hearing kuulokojeista, jotka ovat yhteensopivia ReSound Smart 3D™ -sovelluksen kanssa. Jos mielessäsi on kysymyksiä, ota yhteys audioniimiisi.



ReSound LiNX 3D™



Yhteensopivat mobiililaitteet

Apple: ReSound Smart Hearing -kuulokojeet ovat yhteensopivia seuraavien Apple-laitteiden Made for iPhone (MFi) -toimintojen kanssa:

iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad Pro (12,9-tuumainen)
iPad Pro (9,7-tuumainen)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (4. sukupolvi)

iPod touch (6. sukupolvi)

Tarvitaan iOS 10 tai uudempi. Asenna aina uusi iOS-versio parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Käyttäminen Apple Watchin avulla edellyttää watchOS 3 -versiota tai uudempaa.

Android: ReSound Smart 3D -sovellus on yhteensopiva yleisimpien Android-laitteiden kanssa.

Yhä useammista mobiililaitteista tulee yhteensopivia. Katso uusimmat yhteensopivuustiedot ReSound Smart 3D -sovelluksen sivustosta:


www.resound.com/compatibility

Parittaminen iPhoneen, iPadin tai iPod touchin kanssa

ReSound Smart Hearing -kuulokojeitasi ja iPhoneen, iPadin tai iPod touchin parittaminen

Tarkista paristo

Aseta ReSound Smart -kuulokojeeseen uusi paristo. Pidä paristokotelon kansi auki, jotta kuulokoje ei voi käynnistyä.



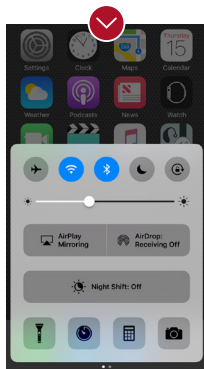


Käynnistä Bluetooth



Tuo ohjauskeskus näkyviin pyyhkäisemällä näytön alalaidasta ylöspäin.



Napauta Bluetooth-kuvaketta.

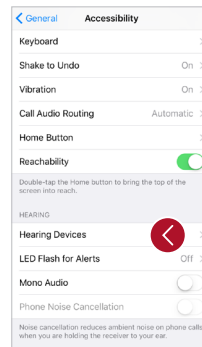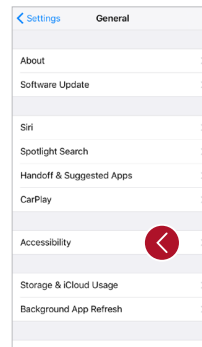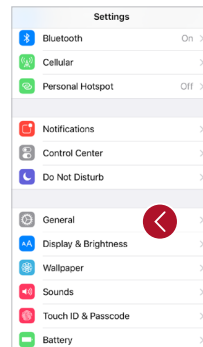

Kuulokojeiden tunnistaminen

Bluetooth-yhteys on nyt otettu käyttöön. Siirry **Asetukset**-kohtaan, napauta **Yleiset ja Käyttöapu**.

Sulje paristokotelon kansi, jotta kuulokoje käynnistyy ja iPhone, iPad tai iPod touch voi tunnistaa sen. Napauta **Kuulokojeet**.

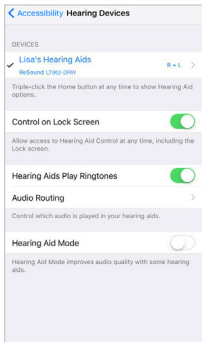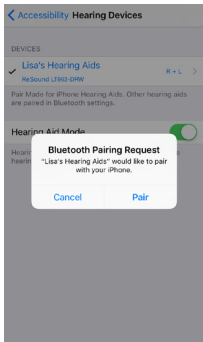

Yhteyden muodostaminen

Kun kuulokojeesi nimi ja mallinumero tulee näkyviin, napauta sitä.

Kun yhteys on muodostunut, kuulokojeesi nimi näkyy valintamerkillä korostettuna. Nimen väri vaihtuu mustasta siniseksi.

Napauta Parita. Kun paritat kahteen kuulokojeeseen, erilliset parituspyynnöt tulevat näkyviin. Toisen pyynnön tuleminen näkyviin voi kestää muutaman sekunnin, kun ensimmäinen paritus on alkanut.

Kun yhteys on muodostettu, näet yhteyden tilan Kuulokojeet-sivulla.

Kuulokojeiden yhdistäminen uudelleen iPhoneen, iPadiin tai iPod touchiin

Kun katkaiset virran kuulokojeista tai Apple-laitteesta, niiden välinen yhteys katkeaa. Voit yhdistää uudelleen kytkemällä kuulokojeisiin virran avaamalla ja sulkemalla paristokoteloiden kannet. Kuulokojeet yhdistetään tällöin automaattisesti Apple-laitteeseen. Voit tarkistaa tämän yhteyden myös Käyttöapu-pikatoiminnon avulla (napsauta aloituspainiketta kolme kertaa). Varmista, että kuulokojeesi on tunnistettu.

Laiteparin muodostaminen useiden Apple-laitteiden kanssa

ReSound Smart Hearing -kuulokojeet voidaan parittaa enintään viiden Apple-laitteen kanssa, mutta yhteys voi olla käytössä yhteen Apple-laitteeseen kerrallaan.

Voit vaihtaa yhteyden Apple-laitteesta toiseen pyyhkäisemällä ylöspäin Apple-laitteen näytön alareunasta ja poistamalla Bluetooth-yhteyden käytöstä.

Ota nyt Bluetooth käyttöön laitteessa, johon haluat yhdistää seuraavaksi.


Todentamisen odottaminen

Kun napautat valintaruudussa **Parita**, ReSound Smart Hearing -kuulokoje ja Apple-laite todentavat parinmuodostuksen. Tähän kuluu hieman aikaa. Käynnistä kuulokojeesi ja joko odota kuutta äänimerkkiä ja aaltoilevaa ääntä tai odota 120 sekuntia, jotta todennus valmistuu. Älä aloita äänensiirtoa ennen kuin todennus on valmis.

Äänen siirtäminen suoraan ReSound Smart Hearing -kuulokojeisiin


Voit siirtää puhelut tai musiikin kaltaista ääntä Apple-laitteesta suoraan kuulokojeisiisi.

Ohjauskeskus

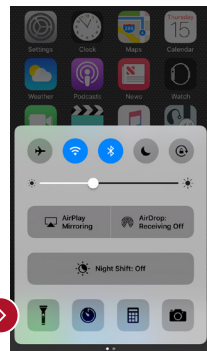


Siirry ohjauskeskukseen pyyhkäisemällä näytön alareunasta. Siirry toiseen ruutuun pyyhkäisemällä vasemmalle. Valitse äänilaite – tässä tapauksessa kuulokojeesi.


Voit lopettaa äänen siirtämisen kuulokojeisiisi ja palata puhelimen normaaliin käyttämiseen valitsemalla **iPhone**. Voit lopettaa äänen siirtämisen kuulokojeisiisi myös napauttamalla mediasoitimen taukopainiketta.

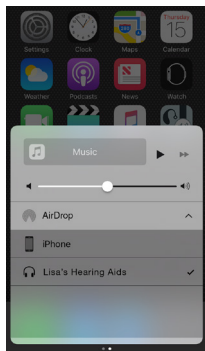

Äänen siirtäminen erilaisista sovelluksista

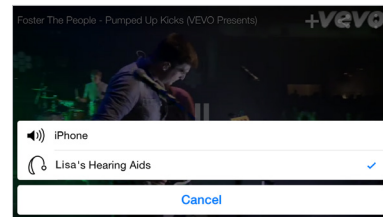


Voit siirtää ääntä muistakin sovelluksista, kuten YouTubea.

 Avaa mediasoitinsovellus, kuten YouTube, ja paina AirPlay-kuvaketta.

Valitse kuulokojeet, joihin ääntä siirretään, ja paina toistopainiketta. Voit pysäyttää videon äänen siirtämisen painamalla taukopainiketta. Voit palauttaa iPhoneen normaaliin toimintaan napsauttamalla **iPhone**.

Puhelin ja FaceTime-puhelut

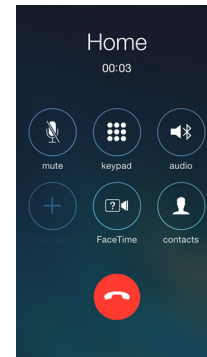


Jos saapuu puhelu, kun ääntä siirretään musiikkisoittimesta, ja vastaat puheluun, musiikki vaimennetaan automaattisesti ja voit puhua puhelimessa.

Kun lopetat puhelun, musiikin siirto jatkuu siitä mihin jäätiin.


i Jos vastaan puheluun Apple Watchin avulla, kuuluuko ääni kuulokojeistasi?
Jos vastaat puheluun Apple Watchin avulla, vieritä Digital Crownin kohdalle ja valitse Vastaa iPhoneeseen. Kuulet soittajan äänen kuulokojeissasi. Soittaja kuulee sinun äänesi kun puhut iPhoneen mikrofoniin.

Äänen reititys

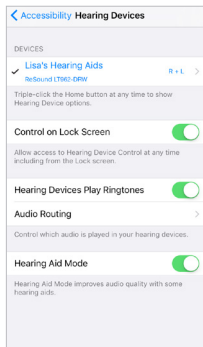

Äänen reitityksellä valitset mihin eri äänitulot ohjataan.

Valitse Asetukset - Yleiset - Käyttöapu - Puheluiden äänireititys.

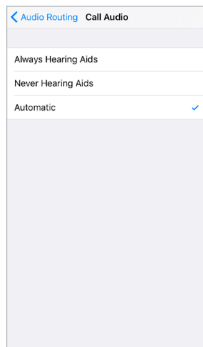

Valitse joko: Puhelun ääni (saapuvat puhelut) tai Mediaääni (esimerkiksi musiikki).

Valitse, kuinka ääni ohjataan, esimerkiksi Aina kuulokojeisiin.

Jos valitaan **Automaattinen** reititys, ääni reititään ensin mahdolliseen langalliseen lähteeseen. Tämän jälkeen etsitään Bluetooth-vakiolaitteita (kuten CarPlay tai A2DP Bluetooth-laitteita) tai kuulokojeita ja ääni siirretään niihin.




Kuulokojeiden ohjaaminen iPhoneen, iPadin tai iPod touchin avulla

Äänenvoimakkuuden ja ohjelmien perustason säädöt


Saat käyttöön äänenvoimakkuuden ja ohjelmien perustason säädöt napsauttamalla aloituspainiketta kolme kertaa.

ReSound Smart Hearing -kuulokojeiden ohjaaminen Applen sovelluksen avulla

Saat käyttöösi kuulokojeiden ohjauskeskuksen **Asetukset-kohdassa**. Valitse **Asetukset - Yleistä - Käyttöapu - Kuulokojeet**. Siirry kuulokojeiden ohjaamiseen napauttamalla ympyröityä i-kirjainta, tai nuolta (mallista riippuen).

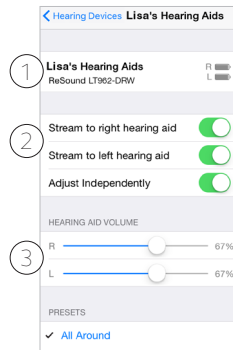

1. Kuulokojeittesi nimi, malli ja pariston tila.
2. Äänensiirto ja äänenvoimakkuuden säätö molempiin kuulokojeisiin tai itsenäisesti kuhunkin kuulokojeeseen.
3. Kunkin kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätö itsenäisesti.

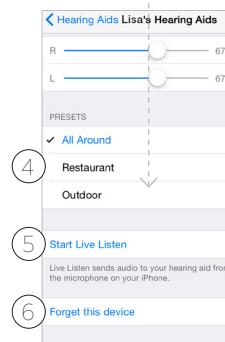

- Näet seuraavat asetukset vierittämällä sivua alaspäin.
4. Ohjelman näkeminen ja muutosten tekeminen siihen.
 5. Voit aloittaa ja pysäyttää suoran kuuntelun, jossa iPhonea, iPadia tai iPod touchia käytetään äänen suoraan kuulokojeisiin lähettävänä mikrofonina.
 6. Napauta tätä, jos haluat unohtaa tämän laitteen ja poistaa tämän parituksen.





ReSound Smart 3D -sovellus: älykäs hallinta ja hienosäätäminen



Lataa ja asenna ReSound Smart 3D -sovellus.

Sovelluksen voi ladata App Store- tai Google Play-palvelusta maksutta toimimalla seuraavasti:

Jos käytössäsi on iPhone, iPad tai iPod touch:

1. Siirry App Storeen.
2. Etsi ReSound Smart 3D -sovellus.
3. Jos käytät iPadia, vaihda vasemmassa yläkulmassa hakuehdoksi **Vain iPhone**.
4. Aloita sovelluksen lataaminen napauttamalla **Nouda - Asenna**.
5. Käynnistä ReSound Smart 3D -sovellus napauttamalla aloitusruudussa näkyvää ReSound Smart 3D -sovelluksen kuvaketta.


Jos käytät Android-laitetta:

1. Siirry Google Play Storeen.
2. Etsi ReSound Smart 3D -sovellus.
3. Napauta Asenna-painiketta. Salli esimerkiksi puhelimen Bluetooth-toiminnon käyttäminen napauttamalla Hyväksy-painiketta.
4. Kun asennus on valmis, käynnistä ReSound Smart 3D -sovellus napauttamalla Avaa-painiketta.




Yhdistäminen

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, se opastaa muodostamaan yhteyden kuulokojeisiin. Aloita hyväksymällä ehdot. Jatka seuraavassa kuvatulla tavalla.

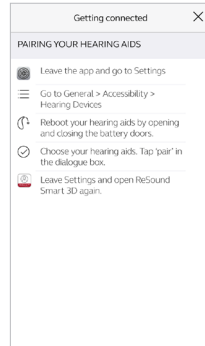

Jos käytät Apple-laitetta:

Jos Apple-laitetta ja kuulokojetta ei ole vielä paritettu, parita ne noudattamalla ohjeita sivulla 6.

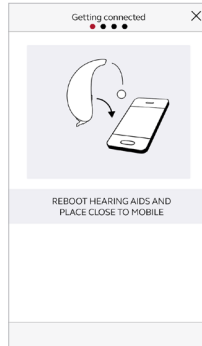

Jos käytät

Android-laitetta:




Parita Android-laite ja kuulokojeet:

Poista kuulokojeet korvista.

Käynnistä ne uudelleen (avaa ja sulje paristokoteloiden kannet).

Aseta kuulokojeet mobiililaitteen lähelle.

ReSound Smart 3D -sovellus ohjaa eteenpäin:

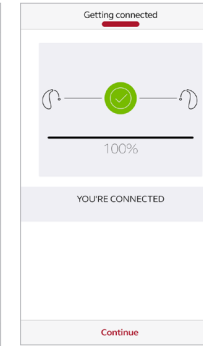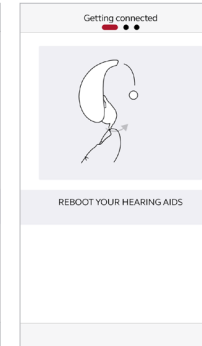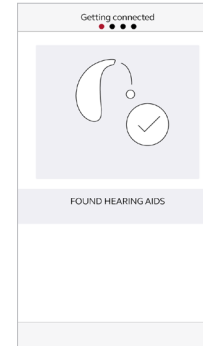

Kun olet parittanut iOS-asetuksista tai parittanut ensimmäisen kerran Androidissa, sovellus vahvistaa löytäneensä kuulokojeesi.

Muodosta seuraavaksi suojattu yhteys sovelluksen ja kuulokojeittesi välille. Käynnistä kuulokojeesi uudelleen. Jos käytät Android-laitetta, teet sen nyt toisen kerran.


Kun vihreä valintamerkki tulee näkyviin, kaikki on valmista!



Muista sallia Push-ilmoitukset ja sijaintiin perustuvat palvelut, jotta pysyt ajan tasalla ja voit hyödyntää sovelluksen täysimääräisesti.

ReSound Smart 3D -sovelluksen yleiskatsaus


ReSound Smart 3D -sovelluksessa on neljä pääruutua. Niiden välillä siirrytään alaosan navigointivalikon avulla.

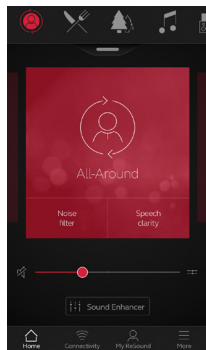

Alkuun

Aloitusruutu toimii pääohjaamona. Täällä voit valita ohjelmia ja hienosäätää ääntä helposti.


Voit palata tähän ruutuun napsauttamalla alavalikossa näkyvää Alkuun-kuvaketta.

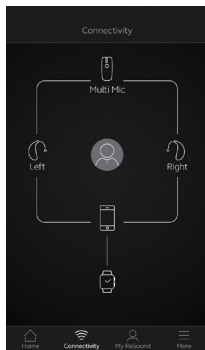

Yhteydet

Yhteydet-ruudussa näkyy tietoja yhteyksistä mobiililaitteeseen, kuulokojeisiin, langattomiin ReSound-lisälaitteisiin ja Apple Watchiin.


Lisäksi varoitukset paristojen tyhjenemisestä näkyvät täällä.

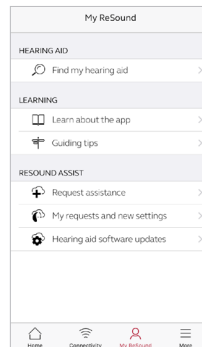

Oma ReSound

Oma ReSound -kohdassa keskitytään sinuun ja kuulokojeisiisi.

Esimerkiksi ReSound Assist löytyy täältä.

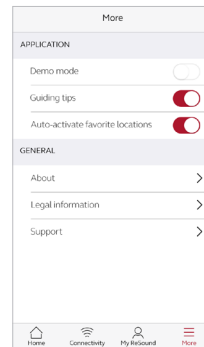


Lisää

Lisää-valikon avulla määritetään sovelluksen yleiset asetukset, saadaan tukea ja voidaan lukea lakisääteiset tiedot.

Ohjelman vaihtaminen

Pääset ReSound Smart 3D -aloitusruudusta vaihtamaan ohjelmia ja suosikkeja kolmella käteväällä tavalla:

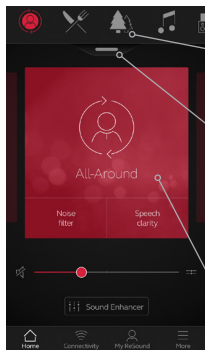

Ylävalikko


Saat kaikki ohjelmat ja suosikit näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle.

Ohjelmalista

Näet kaikki ohjelmat ja suosikit vetämällä alas tai napauttamalla ylävalikon alla näkyvää kahvaa.

Pikapyyhkäisy


Voit vaihtaa ohjelmaa pyyhkäisemällä punaista korttia. Käytettävissä olevat pikapainikkeet näkyvät ylävalikon ohjelmanäkylässä.

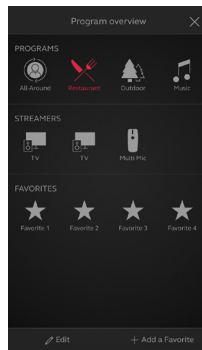

Ohjelmalista

Kun avaat ohjelmalistan, näet kaikki ohjelmat ja suosikit. Voit vaihtaa ja muokata ohjelmia sekä lisätä suosikkeja.

Kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätö

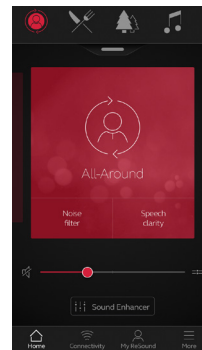


Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää kuulokojeiden äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä.

Mykistäminen


Voit mykistää kuulokojeista kuuluvan äänen napauttamalla äänenvoimakkuuden liukusäätimen vasemmalla puolella näkyvää mykistyskuvaketta.

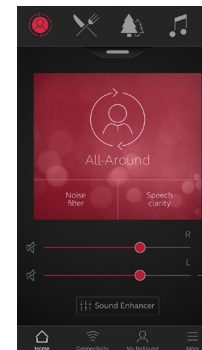

Itsenäinen äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää vasemman ja oikean kuulokojeen äänenvoimakkuutta erikseen jakamalla liukusäätimen. Napsautta sen oikealla puolella näkyvää jakamiskuvaketta. Molempien kuulokojeiden liukusäätimet tulevat näkyviin.

Äänilähettimen äänenvoimakkuuden säätö

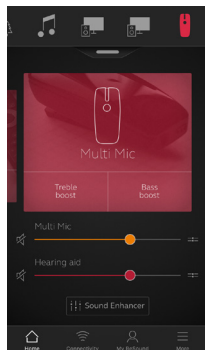


Äänilähettimen äänenvoimakkuuden säätö

Kun äänilähettimen ohjelma on valittu, voit säätää äänensiirron voimakkuutta erikseen oranssin liukusäätimen avulla.

Kuulokojeen äänenvoimakkuus

Voit säätää kuulokojeiden äänenvoimakkuutta ilman että säätö vaikuttaa siirrettävän äänen voimakkuuteen.

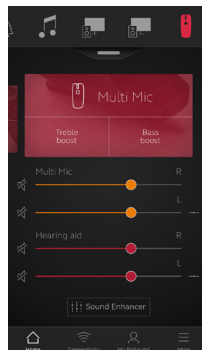

Itsenäinen äänilähettimen äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänilähettimen vasemman ja oikean puolen äänenvoimakkuutta erikseen napauttamalla oranssin liukusäätimen oikealla puolella näkyvää jakamiskuvaketta.


Voinko mykistää kaikki laitteeni?

Voit mykistää haluamasi laitteen napauttamalla sen mykistyskuvaketta (äänenvoimakkuuden liukusäätimien vasemmalla puolella). Voit poistaa mykistykseen napauttamalla jälleen mykistyskuvaketta tai napauttamalla ohjelmakorttia ruudun keskellä.


Pikapainikkeet

Jokaisella ohjelmalla on yksilölliset pikapainikkeensa.

Pikapainikkeet toimivat pikavalintoina äänen optimoimiseen, kun sitä tarvitaan.

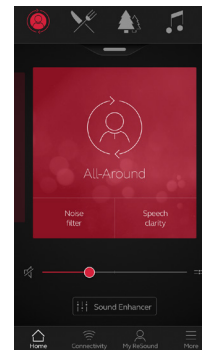

Pikapainikkeet näkyvät punaisessa kortissa heti ohjelman nimen alapuolella.

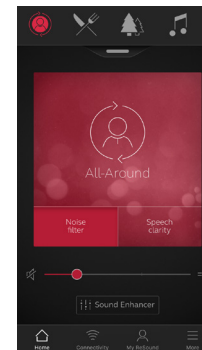

Yleisohjelmassa (Kaiken kattava) on käytettävissä melunvaimennus ja puheen selkeytys.


Voit ottaa toiminnon käyttöön napauttamalla pikapainiketta ja poistaa sen käytöstä napauttamalla uudelleen.




Sound Enhancer: mukauta kuulemasi ääni

Sound Enhancer mahdollistaa basso-, keski- ja diskanttiaänen hienosäätämisen, melunvaimennuksen, puheeseen keskittymisen (säätämällä mikrofoniin suuntausta) ja tuulen kohinan vähentämisen.

Sound Enhancer-toiminnon saatavuus vaihtelee ohjelmakohtaisesti sovituksen mukaan. Melunvaimennus, puheeseen keskittyminen ja tuulisalpa ovat käytettävissä vain ReSound LiNX 3D 9-sarjan malleissa. Basso-, keskiääni- ja diskanttisäädöt ovat käytettävissä kaikissa ReSound LiNX 3D -kuulokojeissa.

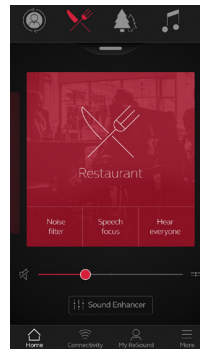

Voit siirtyä Sound Enhancer-toimintoon aloitusruudun alalaidasta.

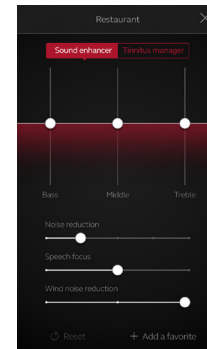


Näet kaikki satavilla olevat sound Enhancer-toiminnot.

Voit säätää ominaisuuksia siirtämällä liukusäätimiä.

Kun säädät tiettyä ominaisuutta, ruudussa keskitytään siihen. Lisätietoja on seuraavalla sivulla.

Voit palata sovitettuihin asetuksiin napauttamalla Nollaa-painiketta.

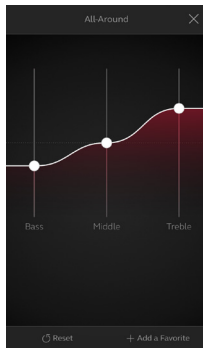

Basso-, keski- ja diskanttiäänet

Voit vahvistaa ja vaimentaa basso-, keski- ja diskanttiääniä.

Säädöt vaikuttavat myös langattomasti siirrettyyn ääneen.




Voiko omat asetukset tallentaa?

Kun olet tyytyväinen tekemiisi asetuksiin, voit tallentaa ne suosikkeina. Jos et tallenna asetuksia, ne jäävät voimaan kunnes käynnistät kuulokojeesi uudelleen (avaamalla ja sulkemalla paristokoteloiden kannet).




Melunvaimennus

Säädä melun vaimennustasoa täydestä ympäristötietoisuudesta (vähän vaimennus) keskittyvään kuunteluun (voimakas melunvaimennus).

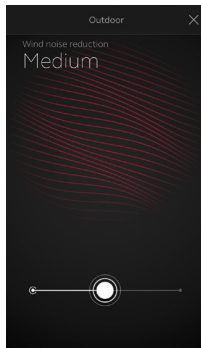

Tuulisalpa

Voit vaimentaa tuulen kohinaa suurimman kuuntelumukavuuden varmistamiseksi kovalla tuulella.

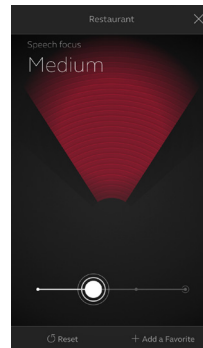

Keskity puheeseen

Valitse tarkalleen mitä haluat kuunnella säätämällä kuulokojen kohdistusta.

Jos kuulokojissa on käytössä automaattinen kohdistaminen, Keskity puheeseen -asetuksen ottaminen käyttöön ottaa käyttöön manuaalisen asetuksen. Voit palata automaattiseen käyttämiseen siirtämällä liukusäätimen oikealle.




Puheeseen keskittymisen optimoiminen

Kun säädät puheeseen keskittymistä, säädä myös meluvaimennusta suurimman tehon saavuttamiseksi.




Tinnituksenhallinta

ReSound LiNX 3D -kuulokojeissa on käytössä tinnituksenhallinta. Sen ominaisuudet ovat käytettävissä sovelluksessa, jos audioniomi on ottanut tinnitusmaskerin käyttöön vähintään yhdessä sovitetussa ohjelmassa.

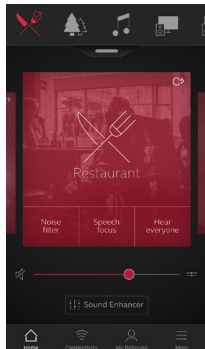

Jos tinnitusmaskeri on sovitettu, ohjelmien oikeassa yläkulmassa näkyy pieni kuvake. Jos siirryt näistä ohjelmista Sound Enhancer -valikkoon, tinnituksenhallinta näkyy käytettävissä olevana.

🏠 Sovelluksen tarjoamat vaihtoehdot

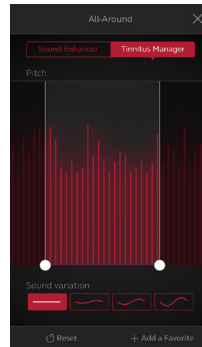

Jos valkoinen kohina on sovitettu johonkin ohjelmaan


Sävelkorkeus

Voit säätää sävelkorkeutta (Pitch) siirtämällä kahta liukusäädintä vasemmalle ja oikealle.

Äänen vaihtelu

Voit säätää valkoisen kohinan vaihtelua napauttamalla alaosassa näkyviä painikkeita.

Voit palata sovitettuihin asetuksiin napauttamalla Nollaa-painiketta.

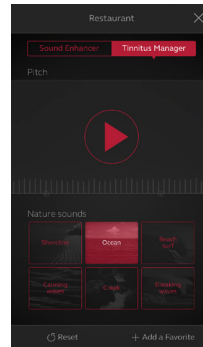

Jos Nature Sound™ on sovitettu johonkin ohjelmaan

Valitse yksi kuulokojeen kuudesta luontoäänestä.


Napauta toistopainiketta (Play) jos haluat ottaa käyttöön valkoisen kohinan ja säätää sävelkorkeutta.



Voiko omat asetukset tallentaa?

Kun olet tyytyväinen tekemiisi asetuksiin, voit tallentaa ne suosikkeina. Jos et tallenna asetuksia, ne jäävät voimaan kunnes käynnistät kuulokojeesi uudelleen (avaamalla ja sulkemalla paristokoteloiden kannet).

🏠 Suosikit

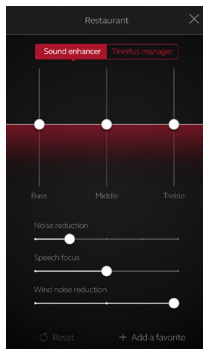


Lisää suosikki

Voit tallentaa mieluisat ääniasetukset suosikkina.

Napauta Sound Enhancer-ruudun tai ohjelmalistan alalaidassa näkyvää Lisää suosikki-painiketta.

Ääniasetuksiin tehdyt muutokset voidaan tallentaa uutena suosikkina tai päivittämällä aiemmin luotu suosikki.

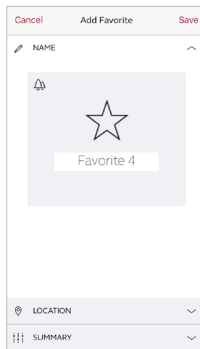


Nimi

Aloita antamalla suosikillesi nimi.



Mitkä ovat suosikkieni asetukset?


Näet suosikkisi asetukset napauttamalla ruudun alaosassa näkyvää Yhteenveto-painiketta. Voit tehdä tämän, kun lisäät suosikin tai siirtymällä muokkaustilaan.

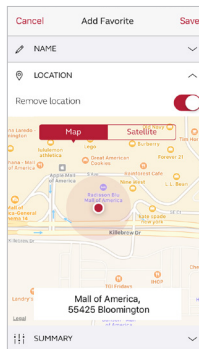

Sijainti

Voit lisätä suosikkiin sijainnin.

Voit valita, että suosikki otetaan kuulokojeissasi käyttöön automaattisesti, kun siirryt tiettyyn sijaintiin.

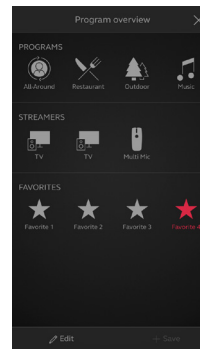

Suosikkien yleiskatsaus


Kun olet tallentanut suosikin, se lisätään ohjelmanvalinta valikoihin.

Voit muokata aktiivista suosikkia tai poistaa sen napauttamalla ohjelmalistan alaosassa näkyvää Muokkaa-painiketta. Napauta tämän jälkeen suosikkia. Voit muokata nimeä tai sijaintia tai napauttaa näytön alalaidassa näkyvää Poista-painiketta.

Voit poistaa kaikki suosikit napauttamalla ohjelmalistan alaosassa näkyvää Poista suosikkejä-painiketta.

Yhteydet

Yhteys ja pariston tila

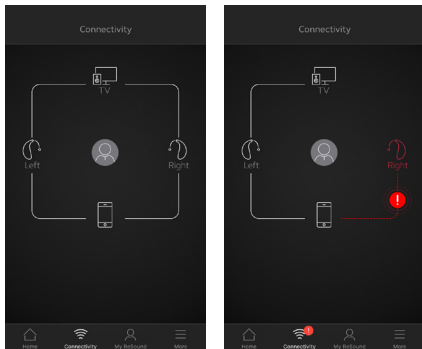

Yhteydet-näyttö


Osoittaa kuulokojeiden, äänilähettimen ja mobiililaitteen välisen yhteyden tilan. Jos Apple Watch on yhdistetty, sekin tulee näkyviin.

Jos näet punaisen viivan ja huutomerkin, yhteys puuttuu tai on katkennut.



Entä jos yhteys katkeaa?

Jos yhteys katkeaa, saat ohjeet sen muodostamiseksi uudelleen napauttamalla huutomerkkiä. Kannattaa tarkistaa, että kuulokojeisiin on kytketty virta, että ne ovat puhelimen kantoalueella ja että paristossa on tarpeeksi varausta. Jos yhteys ei muodostu heti, voit myös avata ja sulkea paristokotelon kannen.

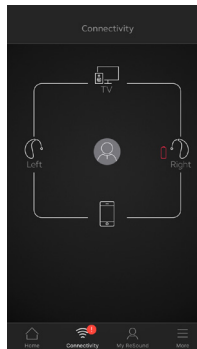

Varoitus paristojen tyhjenemisestä

Jos yhden kuulokojeen tai molempien kuulokojeiden paristo on tyhjenemässä, kuulokojeiden viereen näytössä tulee punainen paristokuvake.




ReSound Assist Kuulonhuoltoa kaikkialla

Jos tarvitset enemmän hienosäätöjä kuin ReSound Smart 3D -sovellus mahdollistaa, saat yhteyden audionomiin ReSound Assist -toiminnon avulla. Voit pyytää apua kuulokojeittesi asetusten säätämisessä. Audionomi lähettää sovelluksen kautta uudet asetukset, jotka voit asentaa kuulokojeisiisi.

ReSound Assist -toiminnon käyttäminen edellyttää seuraavia:


- Palvelu on saatavilla markkina-alueellasi.
- Audionomisi on ottanut käyttöön vähintään yksi sen ominaisuuksista.

Avun pyytäminen

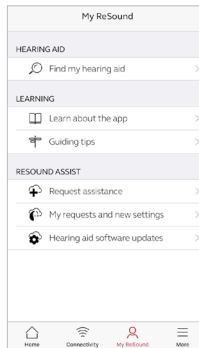

Oma ReSound

Voit siirtyä ReSound Assist -toimintoon sovelluksen alalaidan kohdasta Oma ReSound. Saat yhteyden audionomiisi napauttamalla Pyydä apua -painiketta. Tämän jälkeen noudata ohjeita.

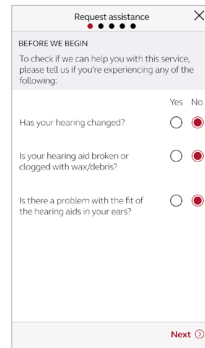

Ennen aloittamista

Ennen aloittamista sinulle esitetään muutama kuuloasi ja kuulokojeitasi koskeva kysymys. Niiden avulla arvioidaan, onko kuulokojeittesi asetusten hienosäätämisestä apua.

Kuulosi muuttuminen varsinkin huonompaan

suuntaan on tärkeää sulkea pois. Jos vastaat kaikkiin kysymyksiin kieltäväst, voit jatkaa napauttamalla Seuraava.




Kokeile ensin ReSound Smart 3D -sovelluksen hienosäätövaihtoehtoja. Jos ongelmat uusiutuvat tai tarvitset enemmän apua kuin ReSound sovellus tarjoaa käyttöösi, käytä ReSound Assist -toimintoa.

Tässä ohjeessa näkyvät ReSound Assist -vaiheet ovat esimerkkejä ReSound Smart 3D -sovelluksen toiminnasta.

Ongelman määrittäminen ja tietojen lähettäminen

Valitse vastauksesi kysymyksiin seuraavissa vaiheissa. Mitä enemmän tietoja annat, sitä paremmin audionomisi pystyy auttamaan.

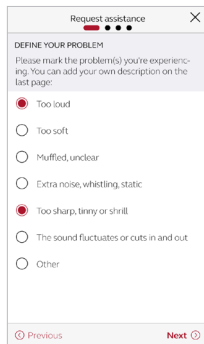


Kuvaile ongelma

Jos mikään annetuista vaihtoehtoista ei kuvaa tilannettasi, valitse ensimmäisessä vaiheessa Muu-vaihtoehto. Avunpyynnön viimeisessä vaiheessa voit itse kuvailla tilanteesi lisäämällä viestin.

Toisessa vaiheessa pääset kertomaan audionomillesi ongelman vakavuudesta sekä kummassa korvassa ja mitä ohjelmia käytettäessä se ilmenee.



Voit jatkaa vain vastaamalla kaikkien kysymyksiin.

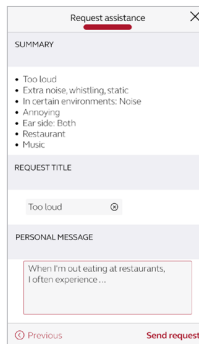


Pyynnön lähettäminen

Kun olet valmis, napauta Lähetä pyyntö. Varmista, että kuulokojeesi on yhdistetty sovellukseen lähettämisen aikana, koska kuulokojeittesi senhetkiset asetukset lähetetään pyynnön mukana. Varmista myös, että mobiililaitteesi on yhdistetty verkkoon.




Kun olet lähettänyt pyynnön, saat vahvistuksen audionomiltasi. Siinä kerrotaan, koska voit odottaa saavasi asetukset tai vastausviestin.

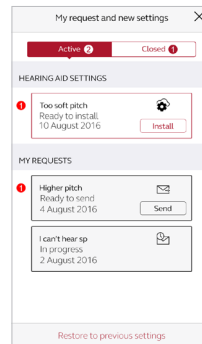

Pyyntöjen tarkasteleminen

Näet edelliset pyyntösi ja audionomisi vastaukset siirtymällä Oma ReSound -osaan ja napauttamalla Omat pyynöt ja uudet asetukset -kohtaa. Näet aktiivisten ja suljettujen pyyntöjen luettelot. Näet lisää napauttamalla.


Uusien kuulokojeasetusten vastaanottaminen

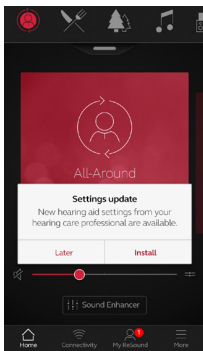

Ilmoitus

Kun audionomisi lähettää uudet kuulokojeasetukset, saat ilmoituksen suoraan sovellukseen. Voit asentaa ne heti napauttamalla Asenna tai silloin kun sinulle sopii napauttamalla Myöhemmin.




Jos napautat Myöhemmin, valikon Oma ReSound -kohtaan tulee muistutusmerkki. Voit asentaa siirtymällä tuohon valikkoon.

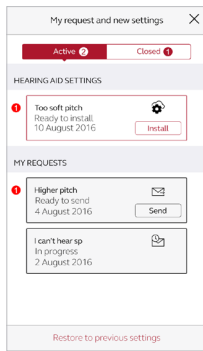

Asennuksen aloittaminen

Kuulokojeen uudet asetukset näkyvät näytössä luettelon ensimmäisenä. Voit aloittaa napauttamalla Asenna. Asennus kestää noin 1 minuutin.

Asetusten mukana audionomisi voi lähettää viestin, josta käy ilmi uusien asetusten sisältö.

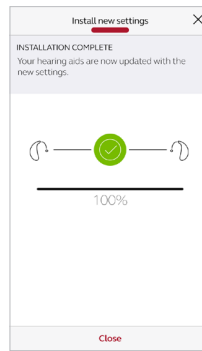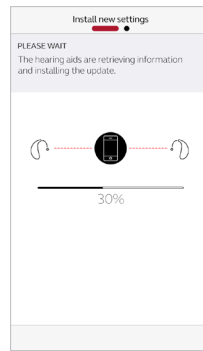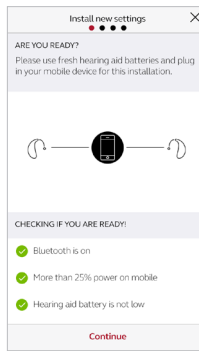

Uusien kuulokojeasetusten asentaminen


Seuraavaksi sovellus tarkistaa uudelleen, että kuulokojeesi ja mobiililaite ovat valmiina. Kuulokojeiden ääni mykistetään asentamisen ajaksi.

Voit seurata asennuksen edistymistä. Kun vihreä valintamerkki tulee näkyviin, asennus on valmis. Napauta Sulje ja kokeile uusia kuulokojeasetuksiasi!

i Jos uusien asetusten asentamisen jälkeen jostain syystä halua palauttaa käyttöön vanhat asetukset, siirry Oma ReSound -valikkoon ja napauta Omat pyynnöt ja uudet asetukset. Voit palauttaa edelliset asetukset alaosassa näkyvän vaihtoehdon avulla noudattamalla ohjeita.


Uuden kuulokojeohjelmiston ottaminen vastaan

ReSound Assist tarjoaa kuulokojeohjelmiston päivityksiä. Joskus päivittäminen on tärkeää suorituskyvyn parantamiseksi. Nyt voit tehdä sen suoraan ReSound Smart 3D -sovelluksessa.

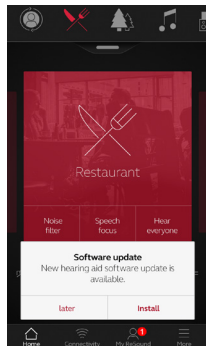




Ilmoitus
Kun kuulokojeisiisi on saatavana ohjelmistopäivitys, saat ilmoituksen suoraan sovellukseen. Voit asentaa heti napauttamalla Asenna tai silloin kun sinulle sopii napauttamalla Myöhemmin.

Jos napautat Myöhemmin, valikon Oma ReSound -kohtaan tulee muistutusmerkki. Voit asentaa siirtymällä tuohon valikkoon.

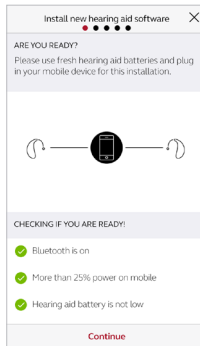

Tarkistetaan, oletko valmis
Sovellus varmistaa, että kuulokojeesi ja mobiililaitte ovat valmiina. Kuulokojeiden ääni mykistetään asentamisen ajaksi.

Uuden ohjelmiston mukana tulee viesti, jossa kerrotaan, mitä päivitys sisältää.

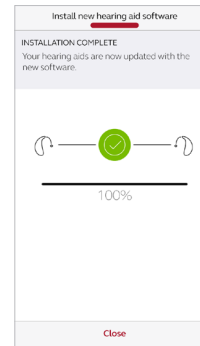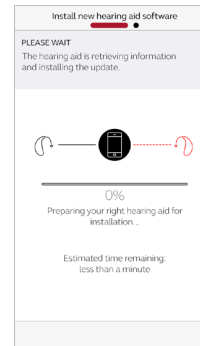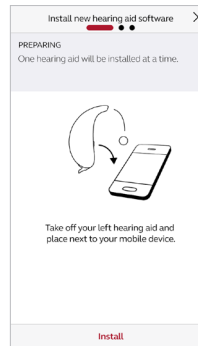

Uuden kuulokojeohjelmiston asentaminen

Sovellus asentaa uuden ohjelmiston yhteen kuulokojeeseen kerrallaan.

Jos käytät kahta kuulokojetta, poista ne korvista yksi kerrallaan ja aseta ne mobiililaitteen lähelle. Pidä kaikki laitteet lähellä toisiaan asennuksen aikana.


Voit seurata asennuksen edistymistä. Kun vihreä valintamerkki tulee näkyviin, asennus on valmis. Napauta lopuksi Sulje. Kuulokojeesi ovat nyt käyttövalmiit!



Voit asentaa uuden kuulokojeohjelmiston silloin kun sinulle sopii. Aikaa kuluu noin **5 minuuttia** kuulokojetta kohden, joten varaa riittävästi aikaa. On suositeltavaa suorittaa aloitettu asennus loppuun.

Opastavia vinkkejä

ReSound Smart 3D -sovellus tarjoaa opastavia vinkkejä, jotta saat paremman kuulokojeen käyttökokemuksen. Ne tulevat näkyviin sovelluksessa kuulokojeiden ja sovelluksen ensimmäisten käyttöviikkojen aikana. Voit päättää itse, haluatko opastavia vinkkejä. Sovellus kysyy tätä.

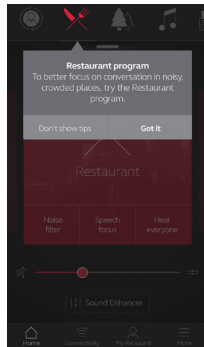


Kokenut kuulokojeen käyttäjä

Jos olet kokenut kuulokojeen käyttäjä, saat sovelluksen käyttövinkkejä.

Niissä kerrotaan sovelluksen ominaisuuksista, jos et ole vielä käyttänyt niitä.

Napauta Ymmärsin, kun olet lukenut vinkin. Napauta Älä näytä vinkkejä, jos et halua enää nähdä niitä.

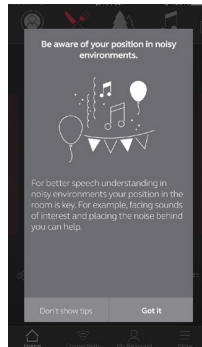


Uusi kuulokojeen käyttäjä

Jos olet uusi kuulokojeen käyttäjä tai haluat oppia enemmän, saat sovelluksen käyttövinkkejä ja yleisen tason opastusta kuulemiseen.

Opastus antaa vinkkejä, miten totut kuulokojeiden käyttämiseen ja miten saavutat parhaat tulokset kuulonkuntoutuksessa.


Sovellukseen tutustuminen

Saat lisätietoja sovelluksen toiminnasta siirtymällä Oma ReSound -valikossa Sovellukseen tutustuminen -kohtaan. Siellä voit tutustua sovellukseen ja sen toimintaan vaiheittain.

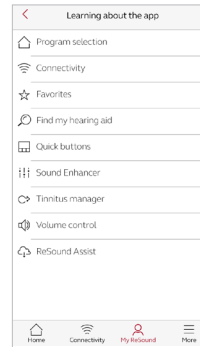

Yleiskatsaus

Luettelo kohteista, joihin voit tutustua, saadaksesi lisätietoja sovelluksesta.

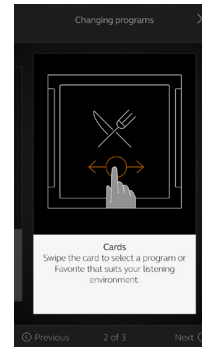


Esimerkki: Ohjelmien vaihtaminen

Opettele vaihtamaan ohjelmia pyyhkäisemällä aloitusruudussa näkyviä kortteja.

Etsi kuulokojeeni

Jos kadotat kuulokojeesi, siirry Oma ReSound-kohtaan ja napauta Etsi kuulokojeeni. Sovellus voi auttaa paikantamaan ne.

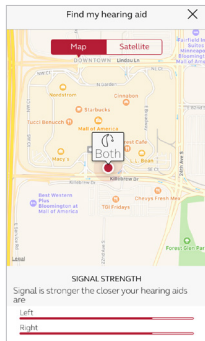

Edellinen sijainti

Näet kartan avulla, missä kuulokojeesi viimeksi olivat, kun ne oli yhdistetty sovellukseen. Napauttamalla kuulokojeita näet osoitteen, jossa ne viimeksi nähtiin, ja ajan.

Voit vaihtaa kartta- ja satelliittinäkömön välillä.


Etsi läheltä

Jos sovellus tunnistaa kuulokojeet läheltä, se näyttää, lähestytkö niitä vai loittonetko niistä. Tarkkaile ruudun alaosassa näkyvää ilmaisinta.

Tämä toiminto edellyttää, että kuulokojeisiin on kytketty virta.

≡ Lisää


Sovelluksen lisävaihtoehdot

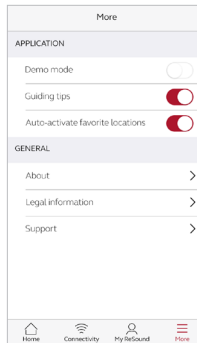

Sovellus-osio:

Sovelluksen mukauttaminen

1. Demotila: voit tutustua sovellukseen ilman yhteyttä kuulokojeisiin.
2. Opastavia vinkkejä: ota vinkit käyttöön tai poista ne käytöstä.
3. Aktivoi suosikkisijainnit automaattisesti: Jos haluat, että suosikkisi otetaan käyttöön automaattisesti, kun siirryt tiettyyn sijaintiin, valitse tämä vaihtoehto.

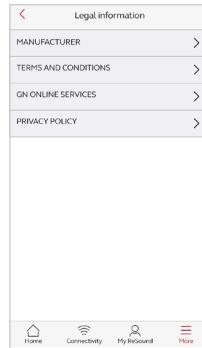

Lakisääteiset tiedot

1. Esimerkiksi valmistajan tiedot ja sovelluksen versionumero.
2. Sovelluksen käyttöehdot.
3. GN Online Services (GN-verkkopalvelut): Voit lukea suostumuksen antamisesta tietojen käsittelyyn, antaa suostumus tai vetää sen pois.
4. Yksityisyydensuoja.

Yleiset-osio:

1. Sovelluksen esittely: Lisätietoja sovelluksesta ja ReSound-tuotemerkeistä.
2. Lakisääteiset tiedot: Katso kuvaus yllä
3. Tuki: Näet vihjeitä ja linkkejä tuen saamiseksi.



ReSound Smart 3D -sovellus Apple Watchille

Voit ohjata älykkäitä kuulokojeita ranteestasi.



Vaatimukset

ReSound Smart 3D -sovelluksen on oltava asennettu iPhoneesi. Noudata Apple Watchin mukana toimitetun iPhone-sovelluksen ohjeita.


ReSound Smart 3D -sovelluksen siirtäminen Apple Watchiin

Sovelluksen siirtäminen Apple Watchiin

- Käynnistä Apple Watch -sovellus iPhoneessa.
- Vieritä alaspäin, kunnes Smart 3D näkyy sovellusluettelossa. Napauta sitä.
- Ota Näytä sovellus Apple Watchissa -vaihtoehto käyttöön.
- Huomaat, että ReSound Smart 3D sovellus on käytettävissä Apple Watchissa.


Lisää-valikko

- Kun Apple Watch ja iPhone on paritettu, Lisää-valikossa on lisää Watch-asetuksia.
- Sound Enhancer -ominaisuudet täytyy ottaa käyttöön tässä valikossa, jotta ne näkyvät Watchissa.

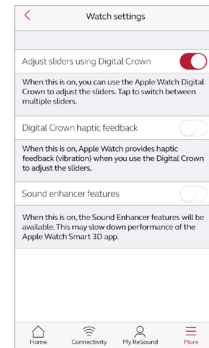

Täydentävien kuvakkeiden ottaminen käyttöön

- Lisäksi voit käyttää ReSound Smart 3D -sovelluksen täydentäviä kuvakkeita. Ne näkyvät Apple Watchin näytössä. Käytössä oleva ohjelma näkyy niiden avulla. Lisäksi voit siirtyä niiden avulla sovellukseen yhdellä napautuksella.
- Voit ottaa täydentävät kuvakkeet käyttöön mukauttamalla Apple Watchin ulkoasun. Paina Watchia pitkään ja valitse Mukauta-vaihtoehto.

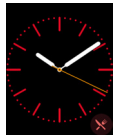


- Pienet neliömäiset alueet ovat täydentäviä kuvakkeita. Voit siirtyä täydentävään ReSound-kuvakkeeseen valitsemalla täydentävän kuvakkeen ja käyttämällä liukusäädintä.




Aloitusrudussa voit säätää äänenvoimakkuutta Apple Watchin digitaalisen kruunun avulla. Äänilähetinohjelmissa voit säätää äänilähetintä napauttamalla äänilähettimen palkkia.

Aloitusruutu

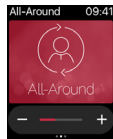

Näet käytössä olevan ohjelman aloitusrudussa.


Ohjelmat ja suosikit

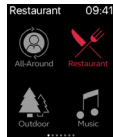

Ohjelmalista

Näet ohjelmalistan pyyhkäisemällä aloitusrudun alalaidasta ylöspäin. Voit valita ohjelman napauttamalla jotain ohjelmakuvakkeista. Voit valita kuulokojeen tai lähettimen ohjelman tai suosikin vierittämällä alaspäin. Voit luoda uusia suosikkeja iPhoneen ReSound Smart 3D-sovelluksen avulla.


Äänenvoimakkuuden säätö

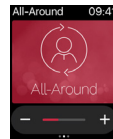

Kuulokojeen

äänenvoimakkuuden säätö

Voit lisätä ja vähentää kuulokojeen äänenvoimakkuutta napauttamalla plus- ja miinus kuvakkeita. Voit mykistää kuulokojeet tai poistaa mykistys force touch-painalluksella.

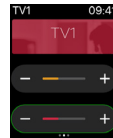


Äänilähettimen

äänenvoimakkuuden säätö


Kun äänilähettimen ohjelma on valittu, voit säätää äänensiirron voimakkuutta erikseen oranssin liukusäätimen avulla. Mykistä äänensiirto tai poista mykistys force touch-painalluksella.

Pikapainikkeet ja Sound Enhancer

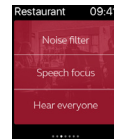

Saat pikapainikkeet ja Sound Enhancerin näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalta. Voit säätää kaikkia Sound Enhancer -ominaisuuksia napauttamalla plus- ja miinus kuvakkeita. Voit palauttaa sovitetut asetukset force touch-painalluksella.


Melunvaimennus

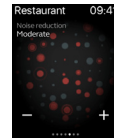


Keskity puheeseen



Tuulisalpa

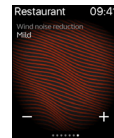

Basso- ja diskanttiaänet

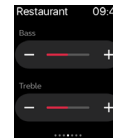



Äänen siirtäminen Android-puhelimesta

Äänensiirto (streaming) Android-puhelimesta ReSound Smart Hearing -kuulokojeisiin ReSound Phone Clip+ -laitteen avulla

Kun ReSound Phone Clip+ on paritettu ja siihen on muodostettu yhteys, Smart Hearing -kuulokojeisiin voidaan siirtää stereoääntä Android-puhelimesta.

Avaa puhelimen mediasoitinsovellus ja paina toistopainiketta. Kuulokojeissasi otetaan käyttöön äänensiirto-ohjelma. Ääni alkaa kuulua muutaman sekunnin kuluttua.

ReSound Phone Clip+ ja Android-puhelimen parittaminen


- Siirry puhelimen asetuksiin ja varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Käynnistä Phone Clip+, irrota hopeanvärinen kansi ja paikanna pieni sininen Bluetooth-parituspainike.
- Aktivoi Bluetooth-paritustila painamalla painiketta. LED-merkkivalo muuttuu siniseksi ja Phone Clip+ on Bluetooth-paritustilassa 2 minuuttia.
- Muutaman sekunnin kuluttua voit valita puhelimen Bluetooth-laiteluettelosta **Kuulokojepuhelin**.
- Jos pyydetään pääsykoodia, syötä **0000** (neljä nollaa) ja valitse **Kuuloke**

ReSound Phone Clip+ ja kuulokojeiden parittaminen

- Avaa kuulokojeen paristokotelon kansi.
- Käynnistä Phone Clip+, irrota hopeanvärinen kansi ja paikanna pieni valkoinen kuulokojeparituspainike.
- Ota käyttöön kuulokojeen paritustila painamalla painiketta. Merkkivalo välähtää keltaisena 2 sekunnin välein merkinä siitä, että Phone Clip+ on paritustilassa 20 sekuntia.
- Sulje kuulokojeiden paristokoteloiden kannet.

Saat lisätietoja ReSound Phone Clip+ -laitteesta käyttöohjeesta, katsomalla ohjevideon tai siirtymällä osoitteeseen www.resound.com/wirelessconnectivity

Tutustu muihin ReSound-sovelluksiin

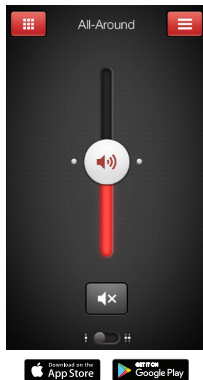

ReSound Smart™



ReSound Smart -sovelluksella saat käyttöösi perussäädöt ja lisätoimintoja, joilla voit mukauttaa oman käyttökokemuksesi.


ReSound Smart -sovellus* on ensimmäinen kuulokojesovellus, joka muodostaa suoran yhteyden kuulokojen ja mobiililaitteen välille.

resound.com/smartapp

*Paikallinen saatavuus voi vaihdella

ReSound Smart -sovellus on yhteensopiva seuraavien ReSound Smart Hearing -kuulokojen kanssa:

- ReSound LiNX²
- ReSound LiNX
- ReSound LiNX TS
- ReSound ENZO²
- ReSound ENZO
- ReSound Up Smart

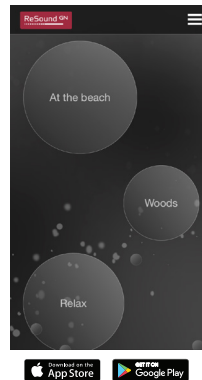

ReSound Relief™




Jos sinulla on tinnituseireita, kannattaa kokeilla ReSound Relief -sovellusta*.

Se auttaa tinnituksen hallinnassa rentouttavien äänien ja harjoitusten avulla.

resound.com/reliefapp

*Paikallinen saatavuus voi vaihdella

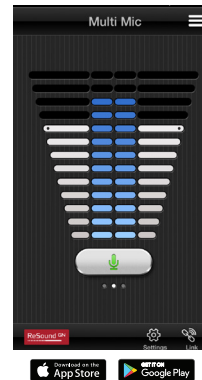

ReSound Control™



Jos käytät langatonta toimintoa tukevia ReSound-kuulokojen yhdessä Phone Clip+ -laitteen kanssa, lataa ReSound Control -sovellus*.

Sen avulla voit vaihtaa ohjelmia ja säätää äänenvoimakkuutta.

resound.com/control

*Paikallinen saatavuus voi vaihdella

Osoitteessa resound.com/smart3Dapp on lisätietoja ReSound Smart 3D™ -sovelluksesta ja sen käyttöohje.

Maailmanlaajuinen

pääkonttori

ReSound A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup, Denmark

P. +45 45 75 11 11

resound.com

CVR no. 55082715

Suomi

GN Hearing Finland Oy/Ab

PL 7

FIN-02211 Espoo

P. +358 9 4777 9700

kuulo@gnresound.com

resound.com

Sverige

GN Hearing Sverige AB

Box 21075

SE- 200 21 Malmö

Tel: +46 31 800 150

info-se@gnhearing.com

gnhearing.se

© 2017 GN Hearing A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. ReSound on GN Hearing A/S:n tavaramerkki. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, watchOS, CarPlay ja AirPlay ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity palvelumerkki. Android, Google Play, Google Play-logo ja YouTube ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.

ReSound GN
.....