

HANDLEIDING

ReSound Unite™ Telefoonclip+



ReSound



rediscover hearing

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Telefoonclip+.

Met de Telefoonclip+ pairt u draadloze ReSound hoortoestellen met mobiele telefoons met Bluetooth. Het resultaat is een helder, probleemloos telefoongesprek. Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

De Telefoonclip+ werkt ook als afstandbediening waarmee u het volume van uw hoortoestellen aanpast en tussen programma's kunt wisselen als u niet aan de telefoon bent.

U kunt ook de microfoon van uw hoortoestel dempen om omgevingsgeluiden buiten te sluiten als u aan de telefoon bent, of als u de Telefoonclip+ als afstandbediening gebruikt (alleen met producten uit de Verso draadloze serie).

Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van de voordelen van de Telefoonclip+. Raadpleeg uw audicien bij overige vragen.

Ga voor meer informatie naar de website <http://www.resound.nl/producten/accessoires>.

Lees voor uw eigen veiligheid het hoofdstuk 'Belangrijke informatie' op pagina 25-31 goed door!

FCC ID: X26BTB-2

Verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Toepassing uitsluitend toegestaan als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: (1) dit apparaat mag geen storende interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke vorm van interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenste werking.

Let op: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. Als dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, hetgeen te bepalen is door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- De verkoper of een ervaren radio/TV technicus raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Gebruikersbestemming

De Telefoonclip+ is een apparaat waarmee gebruikers van een draadloos hoortoestel van ReSound beter telefoongesprekken kunnen voeren. De Telefoonclip+ stuurt signalen over tussen een telefoon met Bluetoothaansluiting en een draadloos hoortoestel van ReSound.

Als u niet aan de telefoon bent, kunt u de Telefoonclip+ ook gebruiken als een basis afstandbediening waarmee u het volume van uw hoortoestellen aanpast, programma's wijzigt en de mutefunctie* van het hoortoestel in- of uitschakelt.

Lijst van landen

Producten zijn bestemd voor gebruik in de landen van de EU en Zwitserland.

*Alleen draadloze Verso hoortoestellen.

Nationale restricties:

Noorwegen: het is niet toegestaan dit product te gebruiken binnen 20 km van het centrum van Ny Ålesund.

Dit product voldoet aan de volgende regelgevende standaards:

In de EU: het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten volgens Bijlage I van de Richtlijn van de Raad 9342/EEC voor medische apparaten (MDD) en essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De conformiteitsverklaring kan worden ingezien op www.resound.com.

In de VS: FCC CFR 47 deel 15, subonderdeel C, sectie 15.247 en 15.249.

In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.

Het product is ingedeeld als ontvanger categorie 2 conform EN 300 440.

iC: 6941C-BTB2

Deze klasse B digitale apparaten voldoet aan de Canadese ICES-003.


Deze klasse B digitale apparaten voldoet aan de Canadese NMB-003.

Inhoud


Beschrijving	8
Van start	10
Uw telefoonclip+ AAN/UITschakelen	11
Pairen met Bluetooth	13
Telefoonbediening.	16
Afstandbediening	20
Gebruikstijd.	21
Uw Telefoonclip+ dragen	21
LED indicatielampje	22
Introductie tot Bluetooth	23
Belangrijke informatie	25
Technische specificaties	32
Garantie	33
Oplossen van problemen	36

Beschrijving

1. Schakelaar voor AAN/UIT
2. Knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek
3. Programmaknop voor hoortoestel
4. Muteknop voor hoortoestelmicrofoon
5. Mini-USB voor opladen

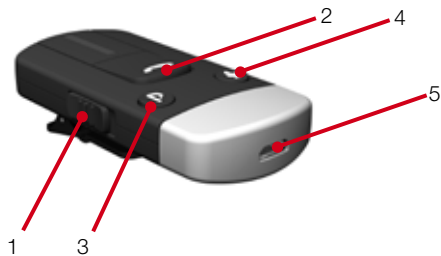

6. Volumeregelaar
7. Microfooningang
8. Klem
9. Knop voor paren hoortoestel
10. Knop voor paren Bluetooth

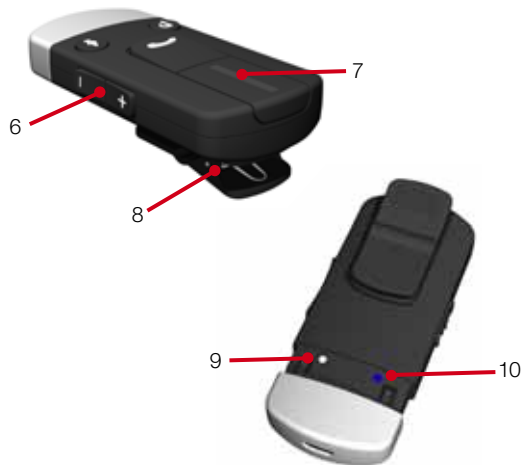

Van start

Accu opladen

Voor u de Telefoonclip+ kunt gebruiken, moet u de accu volledig laden.

Sluit het oplaadsnoer aan op de Telefoonclip+ zoals weergegeven in figuur.

Steek daarna de stekker in het stopcontact.

Tijdens het opladen is het LED-indicatielampje bovenop de Telefoonclip+ rood.

Wanneer hij volledig is opgeladen en nog steeds verbonden aan de lader, brandt het lampje groen, om de 2 seconden onderbroken door een rood knipperend lampje.

Gewoonlijk duurt het opladen van een lege accu ongeveer 3 uur. De Telefoonclip+ kan gerust 's nachts aan de oplader blijven. U kunt de accu niet overladen.

- Laad de Telefoonclip+ minimaal 3 uur op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt. Ook wanneer het LED-indicatielampje al eerder groen oplicht.
- Laad de accu om veiligheidsredenen alleen op met de door ReSound geleverde opladers.



Laad uw ReSound Unite™ Telefoonclip+ niet op terwijl u hem draagt.

Uw Telefoonclip+ AAN/UITschakelen

Om de Telefoonclip+ aan te zetten schuift u de AAN/UITschakelaar naar de AAN-positie. Een wit 'I'-streepje wordt zichtbaar onderaan de schakelaar en het LED-indicatielampje licht iedere 2,5 seconde groen op.

Om uw Telefoonclip+ uit te zetten, schakelt u de AAN/UITschakelaar naar de UIT-positie. Het LED-indicatielampje stopt met knipperen.

Als de batterijspanning laag is, licht het LED-indicatielampje iedere 2 seconden geel op, zodat u weet dat de Telefoonclip+ moet worden opgeladen.

Pairen met hoortoestellen

Let op: de volgende informatie is voornamelijk bedoeld voor uw audicien, die in de meeste gevallen de handelingen uitvoert die nodig zijn om de Telefoonclip+ te gebruiken met uw hoortoestel. De handelingen zijn overigens zo eenvoudig dat ze door bijna iedereen kunnen worden uitgevoerd.

1. Zorg ervoor dat de Telefoonclip+ aanstaat. Zet uw hoortoestellen uit door de batterijlade te openen.
2. Verwijder het zilverkleurige kapje van de Telefoonclip+. Druk met een pen of vergelijkbaar voorwerp op de kleine witte knop op de achterkant van uw Telefoonclip+ (zie afbeelding rechts). Het LED-indicatielampje knippert nu om de 2 seconden geel, om aan te geven dat hij klaar is om te worden gepaird met uw hoortoestellen. Uw Telefoonclip+ blijft gedurende 20 seconden in de pairingmodus.
3. Sluit, als pairingmodus actief is, de batterijlade van beide hoortoestellen en controleer of ze AAN staan. Bij een succesvolle pairing klinkt een melodie in beide hoortoestellen. Het LED-indicatielampje op de Telefoonclip+ licht 2 seconden geel op.



Pairen met Bluetooth

Als uw mobiele telefoon Bluetooth heeft en de juiste profielen ondersteunt, kan hij na de pairing-en verbindingsprocedure communiceren met de Telefoonclip+.

Door de aansluitprocedure kunt u regelen welke Bluetooth-apparaten met elkaar kunnen communiceren. U hoeft deze procedure slechts eenmalig uit te voeren voor elk apparaat dat u gebruikt met de Telefoonclip+.


U kunt maximaal 8 Bluetoothapparaten verbinden met de Telefoonclip+, maar u kunt met slechts 2 Bluetoothapparaten tegelijkertijd verbinding maken.

Hieronder vindt u een beschrijving van de pairingprocedure. Als de pairingprocedure er voor gezorgd heeft dat een mobiele telefoon kan communiceren met de Telefoonclip+, zorgt de verbindingsprocedure ervoor dat het apparaat zijn audiosignaal werkelijk verzendt via de Bluetoothverbinding. Ook deze procedure wordt hieronder beschreven.

Pairen met uw mobiele telefoon

U voert deze procedure uit op uw mobiele telefoon. Iedere telefoon heeft een andere menustructuur. Zie daarom de handleiding van uw mobiele telefoon als u de pairingprocedure niet kunt voltooien aan de hand van de algemene stappen die hier beschreven zijn.

1. Zet uw Telefoonclip+ AAN en verwijder het zilverkleurige kapje. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon AAN is en leg hem naast de Telefoonclip+.
2. Ga naar de verbindinginstellingen op uw telefoon. Zoek de functie 'Bluetooth' in het hoofdmenu of in een van de submenu's, zoals 'Verbindingen'.
3. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele telefoon.
4. Druk met een pen of vergelijkbaar voorwerp op de kleine blauwe Bluetoothknop op de achterkant van uw Telefoonclip+ (zie afbeelding hieronder). De Telefoonclip+ blijft nu 2 minuten in de Bluetooth pairingmodus staan.
5. Ga op uw mobiele telefoon op zoek naar Bluetoothapparaten.
6. In uw mobiele telefoon staat een lijst met gedetecteerde Bluetoothapparaten. Kies "Hoortoestel telefoon" in deze lijst.
7. Uw mobiele telefoon kan nu om een toegangscode vragen. Voer dan "0000" (vier nullen) in.

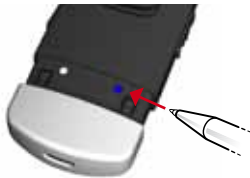


Uw Telefoonclip+ is nu gepaird met uw mobiele telefoon. Sommige mobiele telefoons vragen welke Bluetoothservice u wilt gebruiken. Kies dan 'Hoofdtelefoon'.

Verbinding maken

Als uw mobiele telefoon en Telefoonclip+ zijn gepaird, moet er wellicht nog verbinding gemaakt worden met de mobiele telefoon, zodat de juiste audiosignalen verzonden kunnen worden.

Deze functie staat in het Bluetoothmenu van uw mobiele telefoon, meestal onder een lijst met "Aangesloten apparaten". Selecteer in die lijst uw Telefoonclip+ en kies 'Verbinden'.

Als de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon verbinding met elkaar hebben, ziet u een symbool van een hoofdtelefoon op het scherm van uw mobiele telefoon, zoals: 

De verbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon blijft bestaan zolang beide apparaten zijn ingeschakeld en binnen bereik van elkaar zijn. Als een van de twee apparaten wordt uitgeschakeld of buiten bereik van de ander is, moet u wellicht de verbindingprocedure opnieuw uitvoeren.

Op sommige telefoons kunt u 'Automatisch opnieuw verbinden' instellen. We raden aan dit te doen als die mogelijkheid er is. Zie de handleiding van uw mobiele telefoon hoe u dit kunt instellen.


Telefoonbediening

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hoe u de Telefoonclip+ bedient als u hem gebruikt voor telefoongesprekken.

Let op: behalve de handeling voor het beantwoorden en beëindigen van een telefoongesprek, kunnen één of meerdere van onderstaande handelingen per telefoon verschillen of zelfs niet werken.

Een gesprek aannemen en beëindigen	Druk één keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek.	Als u al aan het bellen bent wordt dit gesprek beëindigd en wordt het nieuwe gesprek, aangegeven door klopsignalen, aangenomen. Als een ander gesprek in de wacht staat, wordt dat gesprek nu actief.
Een gesprek weigeren	Druk twee keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek.	Als u al aan de telefoon bent blijft dit gesprek actief en wordt het nieuwe gesprek, aangegeven door klopsignalen, geweigerd.
Een telefoongesprek overzetten van mobiele telefoon naar Telefoonclip+	Druk één keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek.	
Een telefoongesprek in de wacht zetten	Houd de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek 2 seconden ingedrukt.	Als er al een gesprek in de wacht staat of er komt een inkomend gesprek binnen, dan wordt dit nu het actieve gesprek.
Nummerherhaling	Druk twee keer op de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek (als er geen actief of wachtend gesprek is).	als er twee mobiele telefoons zijn verbonden, is deze handeling van toepassing op de laatstgepaarde telefoon.



<p>Een nummer kiezen met uw stem</p>	<p>Houd de knop voor aannemen/beëindigen telefoongesprek 2 seconden ingedrukt (als er geen gesprek actief is).</p>	<p>Als er twee mobiele telefoons zijn verbonden, is deze handeling van toepassing op de laatst gepairde telefoon.</p> <p>Deze functionaliteit werkt alleen als deze ook beschikbaar en ingeschakeld is op uw mobiele (Bluetooth)telefoon.</p>
<p>Volume van de spreker aan de andere kant van de telefoon harder of zachter zetten</p>	<p>Druk op het + teken op de Telefoonclip+ om het volume harder te zetten.</p> <p>Druk op het -teken op de Telefoonclip+ om het volume zachter te zetten.</p>	
<p>Zet het geluid van de microfoons van uw hoortoestel uit of aan tijdens het telefoongesprek</p>	<p>Druk op de knop mute/unmute  op de voorkant van de Telefoonclip+.</p>	<p>Deze functie is alleen beschikbaar voor de draadloze hoortoestellen uit de Versolijn.</p>

Afstandbediening

Als u niet aan de telefoon bent, kunt u de Telefoonclip+ ook gebruiken als eenvoudige afstandbediening voor uw hoortoestellen*.

Volumeregeling van uw hoortoestel(len)

Het volume van uw hoortoestel(len) harder zetten

Druk het +teken van de volumeregelaar (6 op pagina 9)

Het volume van uw hoortoestel(len) zachter zetten

Druk het -teken van de volumeregelaar (6 op pagina 9).

Bij sommige mobiele telefoons kunt u ook de volumeregeling van de telefoon gebruiken om het volume van uw hoortoestel(len) te wijzigen.

Houd er rekening mee dat als u twee hoortoestellen heeft, het volume van beide hoortoestellen wordt aangepast.

De microfoon van uw hoortoestel(len) tijdelijk in- of uitschakelen (deze functie is alleen beschikbaar voor de draadloze hoortoestellen uit de Verso productlijn).

* Alleen voor draadloze hoortoestellen uit de Alerafamilie geldt: De Alera hoortoestellen moeten eerst worden gepaard met een ReSound Unite Afstandbediening (van de klant zelf of van de audicien) om de afstandbedieningsfunctie van de Telefoonclip+ in te schakelen.

Druk één keer op de knop mute/unmute (4 op pagina 8) op de voorkant van uw Telefoonclip+.

Om de microfoons van uw hoortoestel weer in te schakelen, drukt u weer één keer op de knop mute/unmute (4 op pagina 8) op de voorkant van uw Telefoonclip+.

Schakelen tussen de programma's op uw hoortoestel(len)

Druk op de programmaknop (3 op pagina 8) om de beschikbare programma's op uw hoortoestel(len) te doorlopen.

Gebruikstijd

Het batterijverbruik en de gebruikstijd van de Telefoonclip+ zijn in grote mate afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

De batterij van de Telefoonclip+ kan honderden malen opnieuw worden opgeladen. Als u merkt dat de gebruikstijd veel korter wordt, neem dan contact op met uw audicien.








Uw Telefoonclip+ dragen

Klem de Telefoonclip+ op uw trui, jas of andere kleding met de microfoon (7 op pagina 9) naar boven. Zo vangt de microfoon van de Telefoonclip+ uw stem optimaal op tijdens telefoongesprekken. De Telefoonclip+ heeft een draaibare klem, zodat u kunt zorgen dat de microfoon altijd naar uw mond gericht is.

Uw stemgeluid wordt het beste opgevangen als de Telefoonclip+ 10 tot 30 cm van uw mond af bevestigd is.

LED - indicatielampje

Het LED - indicatielampje bovenop de Telefoonclip+ is multifunctioneel en geeft informatie over de status van uw apparaat.

Knipperen	Betekenis
	Normaal gebruik
	Accu bijna leeg
	Tijdens opladen
	Volledig opgeladen, nog aan de oplader
	Gereed om te pairen met hoortoestel(len)
	Gereed om te pairen met Bluetoothapparaat
	Bluetoothgesprek actief

Introductie tot Bluetooth

Wat is Bluetooth?

Via Bluetooth kunnen apparaten als mobiele telefoons draadloos met elkaar communiceren.

Controleer eerst of de telefoon die u wilt gebruiken beschikt over Bluetooth. Zoek naar het volgende symbool op het toestel of in de gebruikershandleiding.



Kijk ook naar de mogelijke toepassingen van het Bluetoothapparaat, weergegeven als 'profielen'. Het apparaat dat u wilt gebruiken met de Telefoonclip+ moet de juiste Bluetoothprofielen ondersteunen.

Om een telefoongesprek te ontvangen en te voeren op uw mobiele telefoon, moet het profiel 'handsfree' of 'hoofdtelefoon' ondersteund worden. Veel, maar niet alle mobiele telefoons ondersteunen deze Bluetoothprofielen. Zoek deze informatie in de handleiding van uw mobiele telefoon.

Functioneel bereik Bluetooth

In een vrije ruimte heeft de Telefoonclip+ een Bluetoothbereik van ongeveer 10 meter. De twee apparaten hoeven niet in een zichtlijn ten opzichte van elkaar te liggen. De volgende factoren zijn van invloed zijn op het maximumbereik:

- Storing uit de omgeving
- De mobiele telefoon waarmee u verbinding hebt kan een beperkter bereik hebben dan de 10 meter die door de Telefoonclip+ ondersteund wordt.

Als uw mobiele telefoon buiten bereik van de Telefoonclip+ komt, wordt de verbinding beëindigd. Als het apparaat weer binnen bereik komt, zal de Telefoonclip+ de verbinding weer herstellen. Of dit lukt hangt af van de tijd die verstreken is sinds de verbinding verbroken is en van de eigenschappen van de mobiele telefoon.

Belangrijke informatie

Onderhoud en zorg

- Reinig de ReSound Unite™ Telefoonclip+ met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke reinigingsproducten (waspoeder, zeep, etc.) of alcohol om het apparaat te reinigen.
- Schakel de Telefoonclip+ UIT wanneer u deze niet gebruikt en berg hem veilig op.
- Bescherm de Telefoonclip+ tegen een overdaad aan vocht (baden, zwemmen) en hitte (verwarming, autodashboard). Voorkom grote schokken en trillingen.
- Bescherm de microfoon en de oplaadingsingang tegen stof en vuil. Indien nodig kunt u het bijgeleverde reinigingsborsteltje gebruiken voor het reinigen hiervan.

Algemene waarschuwingen

- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen
- De ReSound Unite™ Telefoonclip+ gebruikt digitaal gecodeerde overdracht met laag vermogen om met andere draadloze apparaten te communiceren. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving beïnvloed worden. Breng de Telefoonclip+ in dat geval buiten bereik van het betreffende apparaat.
- Wanneer u tijdens gebruik van de Telefoonclip+ last hebt van elektromagnetische storing, verwijder dan de bron van de storing.

- Vermijd blootstelling aan regen, vocht of andere vloeistoffen om beschadiging van het apparaat of verwondingen aan uzelf tegen te gaan.
- Houd het apparaat en alle mogelijke bedrading weg van draaiende machines.
- Als het apparaat oververhit is geraakt, als het gevallen of beschadigd is, als de bedrading of aansluiting beschadigd is, of als het apparaat in een vloeistof gevallen is, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw audicien.
- Voer het apparaat af in overeenstemming met de lokale reglementen.
- Gebruik het apparaat niet in gebieden met explosiegevaar.

In brand vliegen in een ontvlambare atmosfeer

- Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar ontvlambare gassen hangen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Gebruik de Telefoonclip+ niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is.

- Röntgenstraling, CT-scans en MRI-scans kunnen het functioneren van de Telefoonclip+ nadelig beïnvloeden. We adviseren u het apparaat UIT te schakelen voordat u een procedure met gevaarlijke straling ondergaat. Houd het apparaat buiten de kamer.
- Hoogspanningsapparatuur, grote elektronische installaties en metalen constructies kunnen mogelijk het signaal aantasten en de reikwijdte aanzienlijk verminderen.
- Indien de hoortoestellen niet reageren op de Telefoonclip+ vanwege een ongebruikelijke storing, loop dan weg van het storingsveld.
- Uw hoortoestellen en de Telefoonclip+ hebben bij het aanpassen een unieke netwerkcode gekregen. Dit zorgt ervoor dat de Telefoonclip+ geen hoortoestellen van anderen kan beïnvloeden.
- Breng geen veranderingen of modificaties aan op dit apparaat.
- Het openmaken van de ReSound Unite Telefoonclip+ kan het apparaat beschadigen. Als er problemen optreden die u niet kunt oplossen, vraag uw audicien dan om advies.

- De ReSound Unite Telefoonclip+ mag alleen gerepareerd worden door een bevoegd servicecenter.
- Gebruik de Telefoonclip+ niet in ruimtes waar RF-overdracht verboden is, zoals vliegtuigen etc.
- Verbind de Telefoonclip+ alleen met apparatuur waarvoor hij expliciet bedoeld is.

Onderhoud ingebouwde accu:

- Uw apparaat wordt gevoed door een oplaadbare accu.
- Optimale prestaties van een nieuwe accu worden pas bereikt nadat deze twee of drie keer volledig geladen en weer ontladen is.
- De accu kan honderden keren geladen en ontladen worden, maar uiteindelijk zal hij 'opraken'.
- Koppel de oplader los van de wandcontactdoos en van de Telefoonclip+ als hij niet in gebruik is.
- Als hij niet gebruikt wordt zal een volledig opgeladen accu langzamerhand zijn lading verliezen.
- Het apparaat achterlaten op hete plaatsen, zoals in een afgesloten auto in de zon vermindert de capaciteit en de levensduur van de accu.

- Een apparaat met een koude accu werkt mogelijk tijdelijk niet, ook al is de accu volledig opgeladen. De prestaties van de batterij zijn met name beperkt bij temperaturen die ver onder het vriespunt liggen.

Accu-waarschuwing!

- Pas op: de accu in dit apparaat kan bij verkeerd gebruik een risico op verbranding opleveren.
- Probeer het apparaat niet te openen of de accu te vervangen. Deze is ingebouwd en niet-vervangbaar. Bij gebruik van andere accu's is er een risico op brand of explosie en wordt de garantie beëindigd.
- De accu in uw apparaat mag u niet zelf verwijderen of vervangen. Elke poging daartoe is riskant en kan resulteren in schade aan het apparaat.
- Gebruik de ReSound Unite™ Telefoonclip+ alleen in combinatie met de oplader die meegeleverd is met het product.
- Voer de accu af in overeenstemming met de lokale reglementen.
- Voer de accu niet af als huishoudelijk afval en gooi hem niet in een vuur, aangezien hij kan exploderen.
- Accu's kunnen exploderen als ze beschadigd zijn.

Opladen: neem het onderstaande in acht als er een oplader wordt geleverd bij het apparaat.

- Probeer de accu niet op te laden met een andere dan de meegeleverde AC-oplader. Het gebruik van andere opladers kan het apparaat beschadigen of vernielen en kan gevaarlijk zijn. Gebruik van andere opladers kan alle rechten op garantie beëindigen.
- Raadpleeg uw audicien of er goedgekeurde alternatieven verkrijgbaar zijn.
- Laad het apparaat op volgens de meegeleverde instructies.

Oplader-waarschuwing!

- Als u de voedingskabel of een andere kabel wilt losmaken, trek deze er dan uit aan de aansluitplug, niet aan de kabel.
- Maak nooit gebruik van een beschadigde lader.
- Probeer de oplader nooit uit elkaar te halen omdat u zich dan blootstelt aan het gevaar van een elektrische schok.
- Het incorrect weer in elkaar zetten van het apparaat kan tijdens het gebruik een elektrische schok of zelfs brand veroorzaken.

- Vermijd het opladen van uw apparaat in extreem hoge of lage temperaturen en gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimtes.
- U mag de ReSound Unite™ Telefoonclip+ niet opladen terwijl u hem draagt.

Technische specificaties

Reikwijdte: tot 3 m

Draadloze technologie: 2,4 GHz

Bedrijfstemperatuur: 0 tot 45 °C

Oplaadtemperatuur: 0 tot 45 °C

Opslagtemperatuur: -20 tot 45 °C

Temperatuurtest, transport en opslaginformatie

Dit product is onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten in verwarmingscycli tussen -25 °C en +70 °C conform interne en industriestandaarden.

Garantie

De ReSound Unite™ Telefoonclip+ heeft een beperkte fabrieksgarantie van 12 maanden vanaf de dag van aankoop. Houd er rekening mee dat er in uw land mogelijk andere garanties gelden. Neem contact op met uw audicien voor meer informatie.

Wat dekt deze garantie?

Elk elektrisch onderdeel dat door montage-, fabricage-, of ontwerpfouten, bij normaal gebruik gedurende de looptijd van de fabrieksgarantie, niet naar behoren functioneert, wordt kosteloos vervangen of gerepareerd. U dient de ReSound Unite Telefoonclip+ hiervoor terug te brengen naar het verkooppunt.

Als blijkt dat een reparatie niet haalbaar is, kan het gehele apparaat vervangen worden door een vergelijkbaar apparaat. Uiteraard na wederzijds akkoord van u en uw audicien.

Wat is niet gedekt door de garantie?

Problemen ten gevolge van onjuiste behandeling of onderhoud, buitensporig gebruik, ongevallen, reparaties uitgevoerd door een onbevoegde partij, blootstelling aan corrosieve omstandigheden of schade ten gevolg van vreemde voorwerpen in het apparaat zijn NIET gedekt door de beperkte garantie en maken de garantie mogelijk zelfs ongeldig. Bovenstaande garantie heeft geen invloed op alle juridische rechten die u zou kunnen hebben onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentenproducten. Uw audicien kan een garantie afgegeven hebben die verder gaat dan de bepalingen in deze beperkte garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>De Telefoonclip+ reageert niet op het (kort of lang) indrukken van de knop voor het beantwoorden of beëindigen van een telefoongesprek</i>	De accu in de Telefoonclip+ is leeg	Laad de accu op
<i>De pairingknop op de Telefoonclip+ is ingedrukt, maar ik hoor geen melodietje in mijn hoortoestel nadat de batterijlade is gesloten</i>	De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik	Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen hun draadloos bereik bevinden en herhaal de pairingprocedure
	De Telefoonclip+ en de hoortoestellen hebben niet gelijktijdig in de pairingmodus gestaan	Herhaal de pairingprocedure en verzekert u ervan dat de batterijlades van beide hoortoestellen gesloten worden binnen 20 seconden nadat de pairingknop op de Telefoonclip+ is ingedrukt
<i>De Telefoonclip+ wordt niet gevonden door de mobiele telefoon in het Bluetooth-menu</i>	De Telefoonclip+ en de mobiele telefoon zijn niet binnen hun draadloze bereik	Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon zich binnen hun draadloze bereik bevinden en herhaal de pairingprocedure
	De Telefoonclip+ staat niet in Bluetoothmodus	De Telefoonclip+ staat slechts 120 seconden in de Bluetooth pairingmodus nadat deze geactiveerd is. Herhaal de Bluetooth pairingprocedure

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>Het paren met een telefoon met Bluetooth is mislukt</i>	De Telefoonclip+ heeft de Bluetoothmodus uitgeschakeld voordat de mobiele telefoon klaar was met paren	Herhaal de Bluetooth pairingprocedure en zorg ervoor dat het proces binnen 120 seconden na activering ervan in de Telefoonclip+ afgerond is
	Er is een verkeerde 4-cijferige pincode ingevoerd	Herhaal de Bluetooth pairingprocedure. Als er gevraagd wordt om een pincode, voer dan 0000 (vier nullen) in
<i>De mobiele telefoon gaat over maar het LED-indicatielampje op de Telefoonclip+ knippert niet en ik hoor geen beltoon in mijn hoortoestellen</i>	De Telefoonclip+ is uitgeschakeld	Schakel de Telefoonclip+ in
	De Telefoonclip+ en mobiele telefoon zijn niet gepaird	Voer de Bluetooth pairingprocedure uit en maak verbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon
	De Bluetoothverbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon is verbroken	Zorg dat Bluetooth op uw mobiele telefoon is ingeschakeld en maak weer een Bluetoothverbinding tussen de Telefoonclip+ en de mobiele telefoon, bijvoorbeeld door kort op de telefoonknop van de Telefoonclip+ te drukken
		Voor details over de werking van Bluetooth op de mobiele telefoon verwijzen wij u naar de handleiding van uw telefoon

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

PROBLEEM	OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
<i>De mobiele telefoon gaat over en het LED-indicatielampje op de Telefoonclip+ knippert, maar ik hoor geen beltoon in één of beide hoortoestellen</i>	<p>De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik</p> <p>De batterijspanning in het hoortoestel kan dusdanig laag zijn dat het de digitale streaming niet meer ondersteunt</p>	<p>Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden</p> <p>Vervang de batterij in het hoortoestel.</p>
<i>Degene met wie ik telefoneer hoort mijn stem niet duidelijk</i>	<p>De microfoon van de Telefoonclip+ vangt uw stem niet goed op</p>	<p>Zorg dat de microfoon van de Telefoonclip+ dicht bij uw mond zit en dat de Telefoonclip+ niet tegen uw kleding wrijft tijdens het gesprek</p>
<i>Het geluid van het hoortoestel is te hard of te zacht</i>	<p>Het niveau van het telefoonsignaal is niet geschikt om naar te luisteren</p>	<p>Wijzig het volume op de mobiele telefoon tot het geluid goed is, of pas het volume aan met de toetsen '+' en '-' op de Telefoonclip+. Als alternatief kunt u eventueel de volumeregelaar op uw hoortoestel(len) gebruiken</p>
<i>U hoort geen geluid in het hoortoestel, hoewel hij wel op het telefoonprogramma staat</i>	<p>De Telefoonclip+ en de hoortoestellen zijn niet binnen hun draadloos bereik</p>	<p>Verzekert u ervan dat de Telefoonclip+ en de hoortoestellen zich binnen elkaars draadloos bereik bevinden</p>

Lees informatie met een waarschuwingssymbool zorgvuldig door



WAARSCHUWING wijst op situaties die kunnen leiden tot ernstige verwondingen.

VOORZORGSMAATREGELEN geven situaties aan die kunnen leiden tot lichte verwondingen.



Advies en gebruikerstips over uw ReSound Unite accessoire.



Apparatuur maakt gebruik van RF-overdracht



Dit product valt onder Type B contactonderdelen



'Gemaakt voor iPhone' betekent dat een elektronische accessoire is ontworpen om specifiek te verbinden met een iPhone en dat hij door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de normen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of voor de naleving van veiligheids- en wetgevende reguleringen. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze accessoire met iPhone van invloed kan zijn op de draadloze prestaties.



Vraag uw audicien naar het afvoeren van uw ReSound Unite accessoire



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische Apparatuur 93/42/EEC en Richtlijn R&TTE 1999/5/EEC dienen gericht te worden aan GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750, Ballerup, Denemarken

**Internationaal
hoofdkantoor**

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR-nr. 55082715

GN Hearing Benelux B.V.

ReSound
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Nederland
Tel.: +31 (0)26 319 5000
Fax: +31 (0)26 319 5001
info@gnresound.nl
www.resound.nl

Contactgegevens België

Tel: 02 513 55 91
Fax : +32 (0)2 502 04 09
info@gnresound.be

ReSound



rediscover hearing