



CONNECTIVITÉ SANS FIL

resound.com

ReSound Multi Mic

MODE D'EMPLOI

ReSound



rediscover hearing

## Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi le ReSound Multi Mic. Le Multi Mic est un accessoire sans fil qui transmet le son qu'il capte directement vers une aide auditive. Il permet une communication de qualité en face-à-face lorsqu'il est porté, et peut également être utilisé comme micro de table captant la parole de plusieurs locuteurs.

Le Multi Mic est compatible avec les boucles d'induction et dispose d'une entrée audio ligne au format jack (mono) et d'une entrée audio au format Euro-pin 3 broches pour la compatibilité FM (récepteur FM requis).

Veuillez lire ce manuel attentivement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du Multi Mic. N'hésitez pas à contacter votre audioprothésiste si vous avez des questions.

Vous pouvez également visiter le site Web suivant :

[www.resound.com](http://www.resound.com)

Pour votre sécurité, lisez intégralement la section Informations importantes, page 33.

FCC ID : X26SM-2P

## Déclaration :

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC et ICES-003 des règlements IC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles
- (2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC et ICES-003 des règlements IC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein des installations domestiques. L'appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence pour une installation particulière. Si l'appareil génère des interférences nuisant à la réception de programmes radio ou de télévision, vous pouvez tenter d'y remédier en appliquant l'une des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit électrique différent de celui du récepteur.

Contactez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Toute modification peut annuler le droit d'utilisation lié à l'appareil.

### **Préconisations d'utilisation**

Cet accessoire permet à l'utilisateur de recevoir dans son aide auditive la parole de son interlocuteur ou un signal audio.

Cet appareil respecte les conditions réglementaires suivantes :

Union Européenne : l'appareil répond aux exigences essentielles de l'Annexe I de la Directive Dispositifs Médicaux (DDM)93/42/CEE ainsi qu'aux exigences essentielles et aux dispositions correspondantes de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse :

[www.resound.com](http://www.resound.com)

États-Unis : FCC Chapitre 47 CFR, section 15, paragraphe C.

Canada : IC 6941C-SM2P

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles
2. cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.

En dehors des États-Unis et des États membres de l'Union Européenne, veuillez vous référer à la réglementation en vigueur.

Japon : conforme à la législation japonaise en matière de radio et de télécommunications.

Cet appareil est conforme à la loi Japonaise sur la radio (電波法) et à la loi Japonaise sur les télécommunications (電気通信事業法).

Cet appareil ne doit pas être modifié (sinon le numéro de désignation accordé sera invalide).


## Sommaire

Bienvenue . . . . .	2
Déclaration . . . . .	3
Préconisations d'utilisation . . . . .	4
Présentation . . . . .	8
Préparation . . . . .	10
Mise en marche et arrêt . . . . .	12
Couplage avec une aide auditive . . . . .	12
Démarrage de l'écoute . . . . .	15
Arrêt de l'écoute . . . . .	17
Directivité du microphone . . . . .	18
Mise en place . . . . .	18
Indicateur lumineux (LED) . . . . .	20
Modes de fonctionnement . . . . .	22
Sélection d'un mode de fonctionnement . . . . .	24
Commande de volume et sourdine . . . . .	26
Indicateur lumineux de sourdine . . . . .	28
Fonctions spéciales . . . . .	28


Mode Test . . . . .	31
Informations importantes . . . . .	33
Mises en garde . . . . .	34
Précautions . . . . .	35
Batterie rechargeable . . . . .	36
Mises en garde à propos de la batterie . . . . .	37
Chargeur . . . . .	38
Données techniques . . . . .	40
Températures : test, transport et stockage . . . . .	40
Garantie . . . . .	40
Événements couverts par la garantie . . . . .	41
Événements exclus de la garantie . . . . .	41
Guide de dépannage . . . . .	42

## Présentation

- 1 Bouton marche/arrêt
- 2 Entrée microphone
- 3 Entrée microphone
- 4 Indicateur lumineux LED
- 5 Entrée audio jack (mode Line-In)
- 6 Entrée audio 3 broches (mode FM)

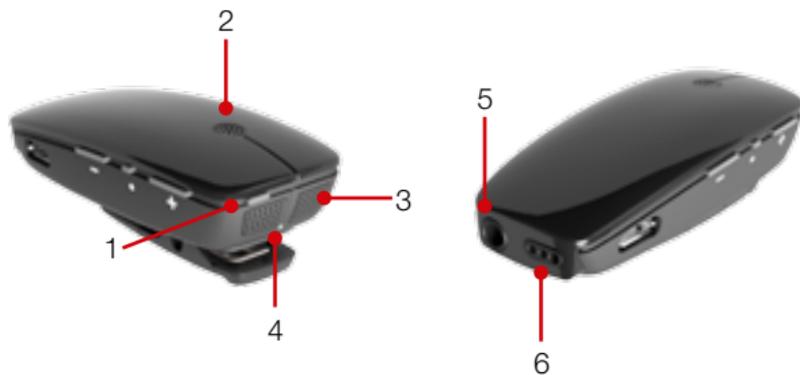

- 7 Bouton "-" (diminution du volume)
- 8 Bouton "Sourdine" (coupure du microphone)
- 9 Bouton "+" (augmentation du volume)
- 10 Prise micro USB (recharge)
- 11 Indicateur lumineux de sourdine
- 12 Indicateurs lumineux (choix du mode / état batterie)
- 13 Bouton "Mode"
- 14 Bouton de couplage
- 15 Pince de fixation

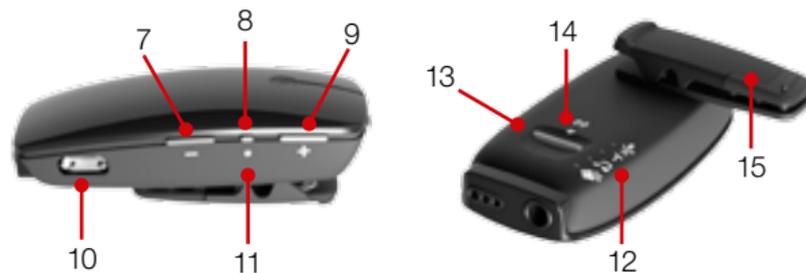

## Préparation


Avant d'utiliser votre Multi Mic, vous devez recharger totalement la batterie. Pour cela, branchez le cordon USB au Multi Mic (voir figure ci-dessous).

Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon à une prise de courant.

Durant la recharge, un voyant lumineux rouge apparaît. Une fois la recharge terminée, le voyant lumineux passera au rouge fixe interrompu par un clignotement vert toutes les 2 secondes tant que le Multi Mic restera branché.

Il faut compter environ 3 heures pour une recharge complète.

Il n'est pas dangereux de laisser le chargeur branché toute la nuit, la batterie ne peut pas être surchargée.

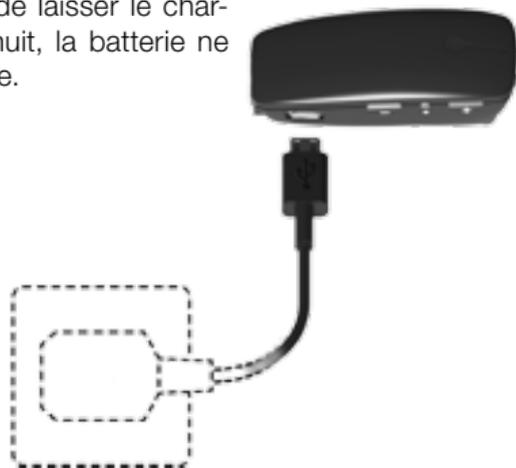

- Lors de la première utilisation, rechargez le Multi Mic pendant plus de 3 heures, même si l'indicateur d'état de la batterie indique qu'elle est complètement chargée.
- Pour des raisons de sécurité, rechargez la batterie uniquement avec un chargeur fourni par ReSound.



*Remarque : pour protéger le Multi Mic lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans la housse de transport fournie.*



Ne rechargez jamais le Multi Mic lorsque vous le portez sur vous.

## Mise en marche et arrêt

Pour mettre en marche le Multi Mic, appuyez sur le bouton marche/arrêt (voir page 8) pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert. Après avoir relâché le bouton, l'indicateur lumineux clignotera en vert toutes les 2 secondes.

Pour arrêter le Multi Mic, appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt (voir page 8) pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne rouge, ce qui indique que le Multi Mic est en cours d'extinction.

Lorsque la batterie est faible, un voyant lumineux orange clignote toutes les 2 secondes.

## Couplage avec une aide auditive



*Remarque : les informations suivantes s'adressent principalement à votre audioprothésiste qui se chargera, dans la plupart des cas, de réaliser les tâches nécessaires à l'utilisation de votre Multi Mic avec votre aide auditive. Cependant, ce processus est relativement simple et peut être effectué par la plupart des utilisateurs. Il est possible de coupler jusqu'à 3 émetteurs ReSound avec une aide auditive (par exemple un Multi Mic et deux émetteurs audio (en option). Par conséquent, le canal 1, 2 ou 3 doit être sélectionné lors du processus de couplage.*

## Couplage sur le canal 1

1. Assurez-vous que le Multi Mic est en marche. L'aide auditive doit être à l'arrêt, le porte-pile ouvert.
2. Avec la pointe d'un crayon ou un objet similaire, appuyez sur le bouton de couplage (un appui court), comme indiqué sur l'illustration de droite. Le voyant lumineux clignote en orange 1 fois toutes les 2 secondes pour indiquer que le mode couplage est actif pour le canal 1. Votre Multi Mic restera en mode de couplage pendant 20 secondes.
3. Avant la fin du mode couplage, fermez le porte-pile de l'aide auditive pour la mettre en marche. La réussite du couplage est indiquée par une mélodie émise par l'aide auditive, ainsi que par l'indicateur lumineux (voir page 8), qui restera orange pendant 3 secondes. Il est possible de coupler plusieurs aides auditives à la fois. Le Multi Mic est prêt à être utilisé.



## Couplage sur le canal 2 ou 3

(pour les personnes qui utilisent plusieurs émetteurs)

Pour coupler le Multi Mic au canal 2, appuyez sur le bouton de couplage à 2 reprises. Le voyant lumineux clignote en jaune 2 fois toutes les 2 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être couplé au canal 2. Refermez ensuite le porte-pile de l'aide auditive.

Pour coupler le Multi Mic au canal 3, appuyez sur le bouton de couplage à 3 reprises. Le voyant lumineux clignote en jaune 3 fois toutes les 2 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être couplé au canal 3. Refermez ensuite le porte-pile de l'aide auditive.

Indications lumineuses de couplage :

Nombre d'appuis	Indication lumineuse	Canal
1		1
2		2
3		3
Couplage réussi		

## Démarrage de l'écoute

Allumez le Multi Mic et assurez-vous que l'aide auditive est en marche. L'écoute peut commencer de 3 façons :

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive pendant environ trois secondes pour activer l'écoute. Si la communication inter-appareils est activée sur les aides auditives, un appui d'un seul côté suffira à activer l'écoute sur les 2 aides auditives.
2. Si vous possédez une télécommande ReSound "Remote Control" (en option), vous pouvez activer l'écoute en utilisant le bouton  de celle-ci.
3. Si vous utilisez une application ReSound offrant des fonctionnalités de télécommande, il vous suffit de sélectionner le programme accessoire correspondant au Multi Mic.

Lorsque l'aide auditive se connecte au Multi Mic, une courte mélodie de connexion à l'accessoire est émise par l'aide auditive, suivie par le son venant du Multi Mic.

### Écoute avec un 2ème ou un 3ème émetteur

Si l'aide auditive est couplée à plusieurs accessoires, vous pouvez vous connecter à ces accessoires de trois façons différentes :

1. Appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive pendant environ 3 secondes une 2ème fois pour vous connecter au 2ème accessoire ReSound, puis une 3ème fois pour vous connecter au 3ème accessoire ReSound.
2. Si vous avez une télécommande "Remote Control" (en option), appuyez sur le bouton "TV" une 2ème fois pour vous connecter au 2ème accessoire, puis une 3ème fois pour vous connecter au 3ème accessoire.
3. Si vous utilisez une application ReSound offrant des fonctionnalités de télécommande, il vous suffit de sélectionner le programme correspondant au Multi Mic.

## Arrêt de l'écoute

*L'écoute peut être arrêtée de trois façons différentes :*

1. Appuyez une fois (appui court) sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive\*.
2. Avec la télécommande "Remote Control" (en option), il vous suffit d'appuyer sur le bouton "P" situé au centre du clavier. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton "Home" pour retourner au réglage de base.
3. Si vous utilisez une application ReSound, il vous suffit de sélectionner le programme souhaité.

\*Cette action activera le dernier programme utilisé.



*Remarque : vous pouvez sortir du rayon d'action votre Multi Mic. Si vous vous éloignez trop du Multi Mic, et que la connexion avec celui-ci est interrompue, vous avez 5 minutes pour vous rapprocher à nouveau du Multi Mic. Votre aide auditive se reconnectera alors automatiquement. Ceci s'applique aussi si le Multi Mic est éteint puis rallumé dans un délai de 5 minutes.*

## Directivité du microphone

Le Multi Mic peut être utilisé pour capter la voix d'un locuteur portant le Multi Mic, ou comme microphone de table, pour capter la voix de plusieurs locuteurs.


## Mise en place

### *Utiliser le Multi Mic avec un seul locuteur*

Lorsque le Multi Mic est utilisé pour écouter un seul locuteur, il doit être fixé sur le vêtement du locuteur grâce à sa pince. Le Multi Mic peut aussi être porté autour du cou du locuteur en utilisant le cordon fourni.

Essayer de le placer à une distance d'environ 10 à 40 cm de la bouche, comme indiqué page suivante. Lorsque vous utilisez la pince, assurez-vous que le Multi Mic est placé verticalement, avec l'indicateur lumineux pointant vers la bouche.

Lorsqu'il est placé verticalement, le Multi Mic passe automatiquement à un mode qui minimise le bruit de fond.

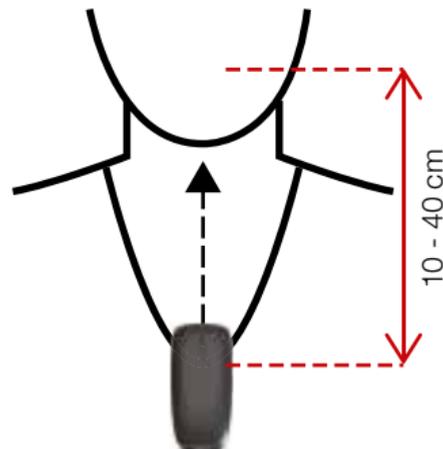

### *Utiliser le Multi Mic comme microphone de table*

Placez le Multi Mic horizontalement sur une surface plane (par exemple une table), à proximité du groupe de personnes que vous souhaitez écouter.

Lorsqu'il est placé horizontalement, le Multi Mic passe automatiquement à un mode qui optimise l'écoute de plusieurs locuteurs.

## Indicateur lumineux (LED)

L'indicateur lumineux vous permet d'obtenir des informations sur le statut du Multi Mic.

État	Normal	En recharge	Recharge terminée
Arrêté			
En marche			
En marche (commande de volume désactivée en mode Micro ou FM)			
En marche (batterie faible)		Aucune indication	Aucune indication
En marche (batterie faible) (commande de volume désactivée en mode Micro ou FM)		Aucune indication	Aucune indication
Désactivation ou activation de la commande de volume (voir page 28)			
Mise en marche			
Arrêt			
Mode Test (voir page 31)			

## Sélection d'un mode de fonctionnement

Le Multi Mic est un émetteur universel. Il s'adapte à la parole d'un locuteur unique lorsqu'il est placé de façon verticale, et à plusieurs locuteurs lorsqu'il est placé de façon horizontale. Il offre également une connectivité avec des sources audio grâce à sa bobine T intégrée et à ses entrées audio jack et FM. Toutes ces possibilités sont accessibles grâce à des modes de fonctionnement.

Il est possible de choisir 4 modes de fonctionnement différents :



Le mode micro

En mode micro, les microphones du Multi Mic sont utilisés. Le Multi Mic optimise la capture de la parole en fonction de sa position : verticalement, le Multi Mic réduira le bruit de fond; horizontalement, le Multi Mic optimisera la captation tout autour de lui.



Le mode bobine T

En mode bobine T, la bobine magnétique intégrée est utilisée. Elle capte le signal audio provenant d'un téléphone compatible ou d'une boucle d'induction équipant certains lieux publics (cinémas, théâtres, écoles, églises, etc.)

**Remarque :** le mode bobine T n'est pas disponible lorsque le Multi Mic se recharge.



Le mode Line-In

En mode Line-In, l'entrée audio jack est utilisée. Le Multi Mic peut alors recevoir le signal audio depuis un équipement audio tel qu'un téléphone portable, un lecteur MP3, une tablette ou un ordinateur. Pour utiliser ce mode, l'équipement audio doit être connecté au Multi Mic à l'aide d'un cordon jack (inclus avec le Multi Mic). Quand ce cordon est branché, le mode Line-In est automatiquement sélectionné. Les autres modes restent cependant accessibles en appuyant sur le bouton "Mode".



Le mode FM

En mode FM, l'entrée audio 3 broches est utilisée. Un récepteur FM (en option) est nécessaire. Lorsque ce récepteur est branché, le mode FM est automatiquement sélectionné. Les autres modes restent cependant accessibles en appuyant sur le bouton "Mode".



*Remarque : les modes Line-In et FM peuvent être sélectionnés uniquement si un cordon ou un récepteur FM est branché au Multi Mic.*

*Pour ces deux modes, le Multi Mic peut être utilisé porté ou à proximité.*

## Sélection d'un mode de fonctionnement

Le bouton "Mode" (voir page 9) peut être utilisé pour voir le mode actuellement utilisé, pour changer de mode ou pour vérifier le niveau de charge de la batterie.

### *Mode actuellement utilisé :*

Pour voir le mode de fonctionnement actuellement utilisé, appuyez sur le bouton "Mode" une fois. L'indicateur lumineux correspondant sur le côté du Multi Mic s'allumera pendant 3 secondes.

### *Changement de mode :*

Pour changer de mode de fonctionnement :

1. Appuyez sur le bouton "Mode" une fois. L'indicateur lumineux correspondant au mode actuel s'allume 3 secondes.
2. Lorsque l'indicateur lumineux est allumé, appuyez à nouveau sur le bouton "Mode" pour sélectionner le mode suivant.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité soit sélectionné.

## *Vérification du niveau de charge de la batterie*

Pour avoir un aperçu du niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton "Mode" pendant 3 secondes. Le ou les indicateurs lumineux doivent se mettre à clignoter.

- Lorsque tous les indicateurs lumineux clignotent, la capacité restante se situe entre 75 et 100 %
- Lorsque 3 indicateurs lumineux clignotent, la capacité restante se situe entre 50 et 75 %
- Lorsque 2 indicateurs lumineux clignotent, la capacité restante se situe entre 25 et 50 %
- Lorsqu'un seul indicateur lumineux clignote, la capacité restante est inférieure à 25%



*Remarque : lorsqu'il reste moins de 30 minutes d'autonomie, l'indicateur lumineux clignote en orange.*


## Commande de volume et sourdine

### Commande de volume

Le Multi Mic est conçu pour délivrer un niveau sonore confortable. Cependant, pour certains équipements ou environnements d'écoute, il peut être utile de modifier le volume. Ce volume peut être ajusté de plusieurs façons. Seul le signal audio envoyé à l'aide auditive peut être modifié.

- Utilisez les boutons "+" et "-" (page 9) pour régler le volume.

Chaque modification de volume sur le Multi Mic est indiquée par un clignotement court de l'indicateur lumineux de sourdine. Lorsque le niveau maximal ou minimal est atteint, l'indicateur lumineux de sourdine clignote plus longuement (1 seconde).

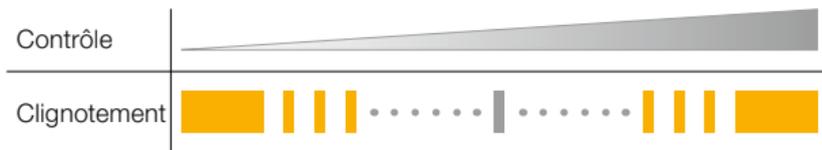

*Remarque : le Multi Mic retourne à son niveau sonore par défaut lorsqu'il est redémarré, pour tous les modes.*

Vous pouvez également utiliser la télécommande "Remote Control" (en option) pour ajuster le volume du son reçu par l'aide auditive.

### Sourdine

Le signal du Multi Mic peut être interrompu momentanément si l'utilisateur ne souhaite pas participer à une conversation ou une activité.

- Pour activer la sourdine, appuyez sur le bouton Sourdine (voir page 9) une fois. L'indicateur lumineux de sourdine clignotera en orange.
- Pour désactiver la sourdine, appuyez à nouveau sur le bouton Sourdine. L'indicateur lumineux de sourdine arrêtera de clignoter en orange.

*Remarque : un changement de mode ou un redémarrage du Multi Mic pendant le mode sourdine annulera ce mode sourdine.*

## Indicateur lumineux de sourdine

Fonctionnement	Indicateur lumineux de sourdine
Fonctionnement normal (sans sourdine)	
Fonctionnement normal (avec sourdine)	

## Fonctions spéciales

### *Détection de chute*

Lorsque le Multi Mic tombe d'une hauteur supérieure à 75 cm, un capteur intégré coupe automatiquement le son pendant 2 secondes, afin de protéger l'utilisateur de l'aide auditive contre les sons très forts et désagréables si le Multi Mic est lâché par accident pendant son utilisation.

### *Verrouillage de la commande de volume*

Si besoin, la commande de volume du Multi Mic peut être verrouillée à un niveau spécifique, uniquement pour le mode Micro et le mode FM. Lorsque la commande de volume est verrouillée, le niveau sonore est celui utilisé lors de la mise en marche du Multi Mic. La fonction sourdine reste activable.

### *Pour verrouiller la commande de volume*

- Assurez-vous que le Multi Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton "-" et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez le bouton marche/arrêt.
- Continuez à appuyer sur le bouton de volume "-" pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.

L'indicateur lumineux clignote toutes les 2 secondes pour indiquer que le réglage du volume est bloqué.

### *Pour déverrouiller la commande de volume*

- Assurez-vous que le Multi Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton "+" et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez le bouton marche/arrêt.
- Continuez à appuyer sur le bouton de volume "+" pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.

*Les niveaux de volume du mode Mic et du mode FM peuvent être ajustés indépendamment. Une fois verrouillé, le niveau de volume de chaque mode est celui utilisé en dernier, ou celui prédéfini.*

*Les niveaux de volume du mode Bobine T et du mode Line-In peuvent être modifiés même lorsque les niveaux de volume du mode Mic et du mode FM sont verrouillés.*

## **Mode Test**

Le mode Test est principalement utilisé pour des mesures de contrôle d'appareillage pédiatrique. Cette mesure permet de vérifier si l'aide auditive et le Multi Mic fournissent un niveau de sortie identique lorsqu'ils sont exposés à un stimulus de 65 dB SPL en entrée.

En mode Test, le microphone du Multi Mic doit être placé en position horizontale. Le microphone est en mode omnidirectionnel avec un gain de 0 dB. Veuillez consulter les directives appropriées pour effectuer ce genre de mesures.

*Pour activer le mode Test :*

- Assurez-vous que le Multi Mic est éteint.
- Appuyez sur le bouton sourdine et le bouton marche/arrêt pendant environ 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert, puis relâchez uniquement le bouton marche/arrêt.
- Maintenez appuyé le bouton sourdine pendant 10 secondes, jusqu'à ce qu'une séquence lumineuse vert-orange-rouge apparaisse sur l'indicateur lumineux.
- L'indicateur lumineux s'allume en orange pour indiquer que le mode Test est activé.

- Lorsque le mode Test est activé, le volume par défaut est appliqué. Si nécessaire, ce volume par défaut peut être ajusté de façon à correspondre au niveau de sortie de l'aide auditive.
- Pour quitter le mode Test et enregistrer les réglages, éteignez le Multi Mic et verrouillez la commande du volume.



*Remarque : les ajustements pour atteindre la concordance des niveaux de sortie peuvent être réalisés sur le Multi Mic (à l'aide du mode Test) ou sur l'aide auditive (à l'aide du logiciel de programmation).*

## **Informations importantes**

### *Entretien et maintenance*

- Nettoyez le Multi Mic en utilisant un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers (détergent, savon, etc.) ou d'alcool.
- Lorsque vous n'utilisez pas le Multi Mic, éteignez-le et rangez-le.
- Protégez le Multi Mic d'une humidité excessive (bain, piscine) et de la chaleur (radiateur, pare-brise de voiture).
- Évitez-lui les chocs et les vibrations.
- Protégez les entrées microphone et les différents connecteurs contre les débris et la saleté. Si nécessaire, utilisez la brosse de nettoyage fournie avec l'aide auditive.

## Mises en garde

- Tenez cet appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Conservez le Multi Mic ainsi que les accessoires livrés avec hors de portée des jeunes enfants (risque d'étouffement).
- Le fonctionnement du Multi Mic peut être perturbé par un autre équipement sans fil.
- Le Multi Mic utilise une transmission sans fil basse puissance à codage numérique pour communiquer avec d'autres équipements sans fil. Dans de rares cas, le fonctionnement des équipements électroniques situés à proximité peut être affecté. Dans ce cas, éloignez le Multi Mic de l'appareil en question.
- Lorsque le Multi Mic est affecté par des interférences électromagnétiques, éloignez-vous de la source.
- Évitez d'exposer le Multi Mic à la pluie, à l'humidité ou autres liquides pour ne pas l'endommager ou vous blesser.
- Maintenez le Multi Mic et tous les cordons éloignés de machines en marche.
- Si le Multi Mic surchauffe, tombe ou est endommagé, si une de ses prises est endommagée, si un cordon est endommagé ou si le Multi Mic est tombé dans un liquide, cessez de l'utiliser et contactez votre audioprothésiste.

- N'utilisez pas le Multi Mic en présence de gaz inflammable, ou dans tout local présentant un risque de combustion.

## Précautions d'emploi

- N'utilisez pas le Multi Mic dans des zones où il est interdit d'utiliser des équipements électroniques.
- Les rayons X (scanner, IRM, etc.) peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement du Multi Mic. Nous vous recommandons de l'éteindre avant tout examen aux rayons X et de le laisser en dehors de la salle.
- Les équipements électroniques de haute puissance, les installations électroniques de grande dimension et les structures métalliques peuvent gêner et réduire de façon significative le rayon d'action du Multi Mic.
- Si l'aide auditive ne communique pas avec le Multi Mic en raison d'une perturbation inhabituelle, éloignez-vous de celle-ci.
- L'aide auditive et le Multi Mic ont reçu un code de communication unique pendant le couplage. Ceci évite aux autres aides auditives d'être affectées.
- N'essayez pas de modifier vous-même le Multi Mic.
- Ouvrir le Multi Mic peut l'endommager. Si des problèmes ne peuvent pas être résolus, consultez votre audioprothésiste.
- En cas de panne, rapportez le Multi Mic à votre audioprothésiste qui le transmettra à un service de réparation agréé.

- N'utilisez pas le Multi Mic dans des zones où l'émission d'ondes radio est interdite, comme dans un avion par exemple.
- Utilisez uniquement les connexions pour lesquelles le Multi Mic est spécifiquement prévu.

### Batterie rechargeable

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Le Multi Mic est alimenté par une batterie rechargeable.
- La capacité maximale d'une nouvelle batterie est obtenue après deux ou trois cycles de recharge/décharge.
- La batterie peut être rechargée/déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et du Multi Mic lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le Multi Mic n'est pas utilisé, sa batterie, même complètement chargée, se déchargera progressivement.
- Laisser le Multi Mic dans un endroit chaud, comme dans une voiture en plein soleil, réduit l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
- Lorsque la batterie est très froide, il est possible que le Multi Mic puisse ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées lorsque les températures sont inférieures à 0 °C.

### Mises en garde à propos de la batterie

- Attention : la batterie utilisée dans le Multi Mic peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation.
- Ne tentez pas d'ouvrir le Multi Mic ou de remplacer la batterie. Elle est intégrée et ne peut pas être changée. L'utilisation d'autres batteries peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion et annule la garantie.
- La batterie du Multi Mic ne peut pas être enlevée ou remplacée par l'utilisateur. Toute tentative est risquée et peut endommager le Multi Mic.
- Ne rechargez le Multi Mic qu'avec le cordon d'alimentation fourni.
- Recyclez les batteries conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne jetez pas la batterie dans les déchets ménagers ou dans un feu car elle pourrait exploser.
- Une batterie endommagée présente un risque d'explosion.

## Chargeur

Merci de respecter les consignes suivantes :

- Ne tentez pas de charger le Multi Mic avec un chargeur autre que celui fourni. L'utilisation de toute autre source d'alimentation peut endommager ou détruire le Multi Mic et peut être dangereuse.
- L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni peut annuler la garantie.
- Veuillez consulter votre audioprothésiste pour connaître la disponibilité d'éventuelles améliorations.
- Rechargez le Multi Mic conformément aux instructions fournies avec.

## Mises en garde à propos du chargeur

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec le Multi Mic. L'utilisation de toute autre source d'alimentation peut endommager ou détruire le Multi Mic et peut être dangereuse.

L'utilisation d'une autre source d'alimentation peut également annuler la garantie.

- Débranchez systématiquement le cordon d'alimentation en tirant sur le connecteur et non sur le cordon lui-même.
- N'utilisez jamais un cordon d'alimentation endommagé.
- N'essayez pas de démonter le cordon d'alimentation. Cette opération présente des risques de choc électrique.
- Un réassemblage incorrect peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Évitez de recharger le Multi Mic en présence de températures trop élevées ou trop faibles. N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ni dans des lieux humides.



Ne rechargez pas le Multi Mic lorsque vous le portez sur vous.

## Données techniques

Rayon d'action :	jusqu'à 25 m (sans obstacles)
Alimentation :	adaptateur secteur 220V
Bande de fréquence :	2,4 GHz
Température (en marche) :	0 °C à 45 °C
Température (recharge) :	0 °C à 45 °C
Température (stockage) :	-20 °C à 45 °C

## Températures : test, transport et stockage

Les accessoires sans fil ReSound sont soumis à de nombreux tests de température et d'essais en chaleur humide entre -25 °C et +70 °C, selon des exigences internes et les standards du marché.

## Garantie

Le ReSound Multi Mic est garanti par le fabricant pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Veuillez noter que des garanties étendues peuvent s'appliquer dans votre pays. Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

## Évènements couverts par la garantie

Tout composant électrique qui, en raison d'un défaut de fabrication ou de conception, ne fonctionne pas correctement lors d'une utilisation normale pendant la durée de cette garantie sera remplacé ou réparé sans frais de pièces ou de main d'oeuvre, sous réserve de leur retour au point de vente. S'il est déterminé qu'une réparation n'est pas possible, l'unité entière peut être remplacée par une unité équivalente, après accord entre l'audioprothésiste et l'utilisateur.

## Évènements exclus de la garantie

Les dysfonctionnements résultant d'un usage impropre ou abusif, d'un défaut d'entretien, d'accidents, de réparations réalisées par une tierce partie non agréée, d'une exposition à un milieu corrosif ou de dommages causés par des corps étrangers à l'intérieur de l'accessoire ne sont PAS couverts par la présente garantie et peuvent entraîner son annulation. La présente garantie n'affecte aucunement les droits que vous pourriez détenir conformément à la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui va au-delà des clauses de cette garantie limitée. Veuillez consulter votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

## Guide de dépannage

SYMPTÔME	Cause possible :	REMÈDE ÉVENTUEL
Le Multi Mic ne s'allume pas	Vous n'appuyez pas assez longtemps sur le bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt au moins 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert pendant 3 secondes
	La batterie est vide	Rechargez la batterie
Le Multi Mic ne s'éteint pas	Vous n'appuyez pas assez longtemps sur le bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt au moins 1,5 seconde, jusqu'à ce que l'indicateur lumineux devienne vert pendant 3 secondes
Il n'est pas possible de passer au mode Line-In et/ou FM	Les modes FM et Line-In sont disponibles uniquement lorsqu'un cordon ou un récepteur FM a été branché	Assurez-vous que le cordon jack ou le récepteur FM est correctement inséré dans le Multi Mic
Le volume ne peut pas être modifié en utilisant la commande de volume du Multi Mic	La commande de volume est verrouillée	Déverrouillez la commande de volume (voir page 29)
L'aide auditive est connectée au Multi Mic, mais aucun son n'est émis	L'aide auditive est hors du rayon d'action du Multi Mic	Rapprochez le Multi Mic de l'aide auditive
	Le Multi Mic n'est plus en marche	Allumez à nouveau le Multi Mic
	La batterie du Multi Mic est vide	Rechargez la batterie

## Guide de dépannage

SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE ÉVENTUEL
L'aide auditive est connectée au Multi Mic, mais aucun son n'est émis	Un équipement audio a été connecté à la prise Jack du Multi Mic, mais l'équipement a été éteint ou le volume coupé	Mettez en marche l'équipement audio ou augmentez son volume
	La sourdine du Multi Mic est activée	Désactivez la sourdine du Multi Mic
Rien ne se passe après avoir activé la connexion au Multi Mic depuis l'aide auditive.	Le couplage du Multi Mic et de l'aide auditive a échoué.	Effectuez à nouveau le couplage
Aucune mélodie de confirmation n'est émise par l'aide auditive après avoir appuyé sur le bouton de couplage	Le Multi Mic est hors du rayon d'action de l'aide auditive	Rapprochez le Multi Mic de l'aide auditive et effectuez un nouveau couplage
	Le Multi Mic et l'aide auditive n'ont pas été en mode couplage simultanément	Répétez la procédure de couplage en vous assurant d'ouvrir puis de refermer le porte-pile de l'aide auditive moins de 20 secondes après avoir appuyé sur le bouton de couplage du Multi Mic.

# Guide de dépannage

SYMPTÔME	Cause possible :	REMÈDE ÉVENTUEL
Une des aides auditives (ou les deux) ne reçoit plus le signal audio envoyé par le Multi Mic	La pile de l'aide auditive est trop faible pour recevoir le signal audio d'un accessoire sans fil	Remplacez la pile de l'aide auditive par une pile neuve, et connectez-la au Multi Mic à nouveau
En mode Line-In, le son est trop fort ou déformé	Le volume sonore de l'équipement audio branché au Multi Mic est trop élevé	Ajustez le volume en utilisant les touches "+" et "-" du Multi Mic, ou en utilisant la commande de volume de l'équipement audio jusqu'à ce qu'un son de meilleure qualité et confortable soit obtenu
Le niveau sonore du Multi Mic est très faible	Le Multi Mic n'est pas bien positionné sur le locuteur	Fixez le Multi Mic sur un vêtement du locuteur ou accrochez-le autour de son cou. Le Multi Mic doit être placé de 10 à 40 cm de sa bouche
	Le volume du son reçu est très faible	Augmentez le volume du Multi Mic en utilisant la touche "+"
	Le volume du son du mode Line-In ou FM est trop faible	Ajustez le volume en utilisant les touches "+" et "-" du Multi Mic, ou en utilisant la commande de volume de l'équipement audio jusqu'à ce qu'un son de meilleure qualité et confortable soit obtenu

Prêtez particulièrement attention aux informations précédées des symboles suivants :



**DANGER** indique une situation qui pourrait entraîner des blessures graves.

**ATTENTION** indique une situation qui peut entraîner des blessures mineures



indique des conseils et astuces pour bien utiliser votre accessoire ReSound.



Ce dispositif dispose d'un émetteur RF qui fonctionne dans la bande de fréquence 2,4 GHz - 2,48 GHz.



Collecte sélective : consultez votre audioprothésiste pour la mise au rebut de votre accessoire.



Toute question concernant la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ou la Directive 1999/5/CE sur les équipements radio et les équipements et terminaux de télécommunications doivent être adressées à GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Denmark.





## **Siège mondial**

ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup, Danemark  
Tél. : +45 45 75 11 11  
Fax : +45 45 75 11 19  
[www.resound.com](http://www.resound.com)  
CVR no. 55082715

## **France**

GN Hearing France SAS  
Zone Silic – Bâtiment Liège  
1 place des Etats-Unis  
94150 Rungis  
Tél. : +33 (0)1 75 37 70 00  
Fax : +33 (0)1 75 37 70 01  
[info@gnresound.fr](mailto:info@gnresound.fr)  
[www.resound.fr](http://www.resound.fr)

## **Suisse**

GN ReSound AG  
Schützenstrasse 1  
CH-8800 Thalwil  
Tél. : +41 (0)44 722 91 11  
Fax : +41 (0)44 722 91 12  
[info@gnresound.ch](mailto:info@gnresound.ch)  
[www.resound.ch](http://www.resound.ch)

## **Belgique**

GN Hearing Benelux BV  
Het Hezeland 5-7  
Boîte postale 85  
NL – 6930 AB Westervoort  
Tél : +32 (0)2 513 55 91  
Fax : +32 (0)2 502 04 09  
[info@gnresound.be](mailto:info@gnresound.be)  
[www.resound.be](http://www.resound.be)