


MODE D'EMPLOI

ReSound Unite™ Phone Clip+



ReSound

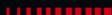

rediscover hearing

Bienvenue

Félicitations pour votre achat d'un kit main-libre Phone Clip+.

Phone Clip+ vous permet de connecter vos aides auditives sans fil avec des téléphones portables Bluetooth. Ceci offre une connectivité téléphonique claire et sans Larsen, que vous soyez chez vous, au bureau ou en déplacement.

Le kit main-libre Phone Clip+ sert aussi de télécommande de base, vous permettant de régler le volume de vos aides auditives et de changer de programme lorsque vous ne parlez pas au téléphone.

Vous pouvez aussi choisir de mettre l'aide auditive en mode Sourdine pour supprimer les sons environnementaux en coupant les microphones de vos aides auditives lorsque vous parlez au téléphone ou pour utiliser le kit Phone Clip+ comme télécommande (gamme sans fil ReSound Verso uniquement).

Veuillez lire ce manuel attentivement afin de profiter pleinement de votre Phone Clip+. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter votre audioprothésiste.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Internet <http://www.resound.fr/products/accessories>.

Pour votre sécurité, lisez attentivement le chapitre Informations importantes, aux pages 25-31.

FCC ID: X26BTB-2

À l'attention des résidents des USA :

Cet équipement est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein des installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications.

Il est toutefois impossible de garantir l'absence d'interférence dans une installation particulière. Si, lors de son activation et de sa désactivation, l'équipement génère des interférences nuisant à la réception de programmes radio ou télévisés, vous pouvez tenter d'y remédier en appliquant l'une des méthodes ci-après.

- Modifiez l'orientation ou la position de l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Contactez le revendeur ou un technicien audio/TV qualifié.

Toute modification peut annuler le droit d'utilisation lié à l'équipement.

Préconisations d'utilisation

Le kit main-libre Phone Clip+ est conçu pour permettre aux utilisateurs d'aides auditives ReSound de mieux suivre les conversations au téléphone. La fonction essentielle de Phone Clip+ est de transférer les signaux entre un téléphone Bluetooth et une aide auditive sans fil ReSound.

Lorsqu'il n'est pas utilisé pour une conversation téléphonique, le kit Phone Clip+ peut aussi être utilisé comme télécommande de base, permettant de régler le volume, de changer de programme et de mettre l'aide auditive en mode Sourdine*.

Liste des pays :

Les produits sont uniquement destinés à la vente dans les pays de l'Espace économique européen et en Suisse.

*Coupure des microphones, fonction disponible dans la gamme sans fil ReSound Verso uniquement.

Restrictions nationales :

Norvège : Il est interdit d'utiliser l'appareil à moins de 20 km du centre de Ny Ålesund, Norvège.

Ce produit respecte les conditions réglementaires suivantes :

Dans l'Union européenne : ce dispositif est conforme aux exigences essentielles de l'Annexe I de la Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et aux exigences essentielles et dispositions correspondantes de la Directive 1999/5/CE (équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications). La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse : www.resound.com

États-Unis : FCC Chapitre 47 CFR, article 15, paragraphe C, alinéa 15.247 et 15.249.

D'autres exigences réglementaires s'appliquent selon les pays autres que les USA et les états membres de l'U.E. Veuillez vous référer à la réglementation en vigueur dans ces pays.

Ce produit est homologué en matériel de classe 2 selon la norme EN 300 440.

iC : 6941C-BTB2

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Au Japon :


Ce dispositif a reçu un numéro de désignation du Ministère des Affaires internes et des communications en vertu de "l'Ordonnance relative à la certification de la conformité aux réglementations techniques etc. d'équipements radio spécifiés (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)" Article 2-1-xx "Ce dispositif ne doit pas être modifié (sinon le numéro de désignation accordé sera invalide)"

Sommaire


Description	8
Prise en main	10
Mise en marche et arrêt	11
Appairage Bluetooth	13
Fonctionnement du téléphone	16
Réglage du volume	20
Autonomie.	21
Porter le kit main-libre Phone Clip+.	21
Indicateurs lumineux.	22
Présentation de la technologie Bluetooth	23
Informations importantes	25
Caractéristiques techniques	32
Garantie	33
Guide de dépannage	36

Description

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Bouton Décrocher/Raccrocher
3. Bouton sélecteur de programme
4. Bouton "Sourdine" (coupure des microphones des aides auditives)
5. Prise USB pour chargement

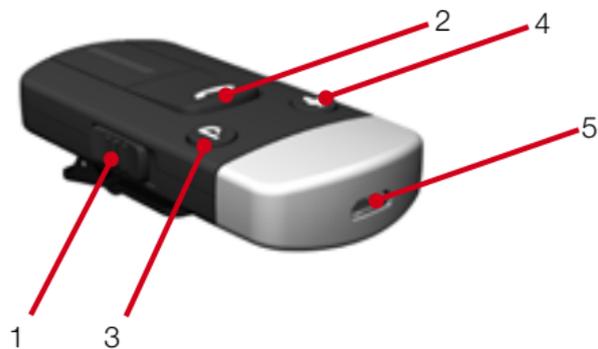

6. Commande de volume
7. Entrée microphone
8. Pince de fixation
9. Bouton de couplage (aides auditives)
10. Bouton d'appairage Bluetooth (téléphone)

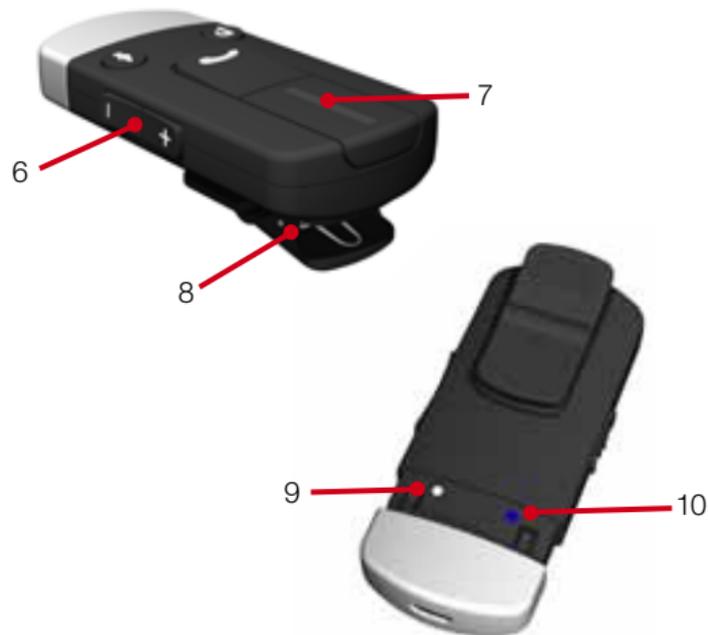

Prise en main

Chargement de la batterie

Avant d'utiliser votre kit main-libre Phone Clip+, vous devez charger totalement la batterie.

Pour la charger, branchez le câble de chargement dans le kit Phone Clip+ comme indiqué sur le schéma à droite.

Puis branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans une prise de courant.

Pendant le processus de chargement, l'indicateur lumineux (LED) en haut du kit Phone Clip+ s'allume en rouge.

Une fois le chargement terminé, et toujours connecté au chargeur, la LED passera au vert fixe interrompu par un clignotement rouge toutes les 2 secondes.

Charger une batterie vide prend environ 3 heures. Il n'est pas dangereux de laisser le chargeur branché toute la nuit, la batterie ne peut pas être surchargée.

- Lors du chargement de votre kit main-libre Phone Clip+ pour la première fois, laissez-le se charger pendant au moins 3 heures, même si l'indicateur montre que la batterie est totalement chargée (voir la section sur les "indicateurs lumineux").
- Pour des raisons de sécurité, chargez la batterie uniquement avec des chargeurs fournis par ReSound.



Ne chargez pas le kit main-libre ReSound Unite Phone Clip+ lorsque vous le portez sur vous.

Mise en marche et arrêt

Pour allumer votre Phone Clip+ faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt (1 à la page 8) vers le bas. Une icône blanche "I" sera visible sur la base de l'interrupteur et l'indicateur LED clignotera en vert toutes les 2,5 secondes.

Pour éteindre votre Phone Clip+ faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers le haut. La LED s'arrêtera de clignoter.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la LED clignote en jaune toutes les 2 secondes pour indiquer que la batterie doit être rechargée.

Couplage avec des aides auditives 

Remarque : Les informations suivantes sont destinées principalement à votre audioprothésiste, qui, dans la plupart des cas, effectuera les tâches nécessaires avant que vous puissiez utiliser votre kit main-libre Phone Clip+ avec vos aides auditives.

Cependant, le processus est conçu pour être simple et à la portée de quasiment tout le monde.

1. Assurez-vous que le kit main-libre Phone Clip+ est allumé. Votre aide auditive doit être éteinte. Pour ce faire, ouvrez le porte-pile.
2. Enlevez le cache argenté du Phone Clip+. Avec la pointe d'un stylo ou un objet similaire, appuyez une fois sur le petit bouton de couplage blanc situé au dos de votre Phone Clip+ (voir l'image à droite). La LED clignote alors en jaune toutes les 2 secondes pour indiquer qu'il est prêt à être couplé avec vos aides auditives. Votre Phone Clip+ restera en mode de couplage pendant 20 secondes.
3. Pendant que le mode de couplage est actif, fermez le porte-pile sur vos deux aides auditives et assurez-vous qu'elles soient allumées. La réussite du couplage sera indiquée par une mélodie audible jouée sur vos deux aides auditives. De plus, la LED sur le Phone Clip+ restera allumée (en jaune) pendant 2 secondes.



Appairage Bluetooth

Si votre téléphone portable est doté de connectivité Bluetooth et est compatible avec les profils appropriés, il peut communiquer avec le Phone Clip+ uniquement après avoir réalisé deux procédures simples : l'appairage et la connexion.

La procédure d'appairage vous permet de contrôler quels sont les dispositifs Bluetooth qui sont autorisés à communiquer entre eux. Elle ne doit être accomplie qu'une seule fois pour chaque dispositif (ex : téléphone portable) que vous souhaitez utiliser avec votre Phone Clip+.


Vous pouvez appairer jusqu'à 8 dispositifs Bluetooth avec le même Phone Clip+, mais seulement 2 dispositifs Bluetooth peuvent être connectés/actifs à la fois.

La procédure d'appairage est décrite dans la section suivante. Une fois qu'un téléphone portable est autorisé à communiquer avec le Phone Clip+ par la procédure d'appairage, la procédure de connexion configure le dispositif pour émettre son signal audio sur la connexion Bluetooth. Cette procédure est aussi décrite dans la section suivante.

Appairage de votre téléphone portable

La procédure d'appairage est contrôlée par votre téléphone portable. Les différents téléphones portables ont différentes structures de menu. Vous devez donc consulter le manuel de votre téléphone portable si vous ne pouvez pas effectuer la procédure d'appairage avec les étapes génériques décrites ici.

1. Allumez votre Phone Clip+ et enlevez le couvercle argenté. Placez votre téléphone portable à côté du Phone Clip+, et assurez-vous que le téléphone est allumé.
2. Cherchez les réglages de connectivité sur votre téléphone. Recherchez la fonction "Bluetooth" dans le menu principal ou l'un des sous-menus tels que "Connexion".
3. Sur votre téléphone portable, assurez-vous que la fonction Bluetooth est active.
4. Avec la pointe d'un stylo ou un objet similaire, appuyez une fois sur le petit bouton bleu d'appairage Bluetooth au dos de votre Phone Clip+ (voir l'image ci-dessous). Le Phone Clip+ passera alors en mode appairage Bluetooth pendant deux minutes.
5. Sur le téléphone portable, choisissez de rechercher des dispositifs Bluetooth.
6. Votre téléphone portable doit présenter une liste des dispositifs Bluetooth découverts. Sélectionnez "Hearing Aid Phone" dans cette liste.
7. Il se peut que votre téléphone portable vous demande alors un code. Dans ce cas, entrez "0000" (quatre zéros).

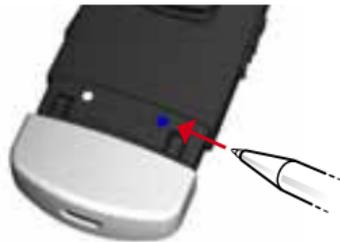

Votre Phone Clip+ doit maintenant être appairé avec votre téléphone portable. Certains téléphones portables peuvent vous demander quel est le service Bluetooth que vous souhaitez activer. Sélectionnez "Headset" (casque).

Connexion

Une fois le téléphone portable et le Phone Clip+ appairés, le mobile devra peut-être être connecté avant d'envoyer les signaux audios appairés.

Cette fonction doit aussi apparaître dans la fonction "Bluetooth" de votre téléphone portable, normalement dans une liste de "Dispositifs reliés". Dans cette liste, choisissez Phone Clip+ et sélectionnez "Connecter".

Lorsque votre Phone Clip+ et votre téléphone portable sont connectés, il se peut que vous voyiez un symbole d'écouteur sur l'écran principal de votre téléphone portable, semblable à ceci : 

La connexion entre le Phone Clip+ et le téléphone portable se maintiendra tant que les deux dispositifs sont allumés et à portée l'un de l'autre. Si l'un des dispositifs est éteint ou hors de portée, il se peut que vous deviez effectuer la procédure de connexion à nouveau.

Sur certains téléphones, vous pouvez configurer une "Reconnexion automatique". Nous vous recommandons de le faire si cette fonction est disponible. Consultez le mode d'emploi de votre téléphone portable pour obtenir des instructions sur cette fonction le cas échéant.

Fonctionnement du téléphone

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un aperçu du fonctionnement du kit main-libre Phone Clip+ lors de l'utilisation pour les appels téléphoniques.

Remarque : à l'exception des opérations de prise et de fin d'appel, les opérations ci-dessous sont disponibles lorsque le téléphone est compatible.

Répondre et mettre fin à un appel	Appuyez une fois sur le bouton décrocher/raccrocher	si un autre appel est déjà actif il sera terminé et le nouvel appel entrant, indiqué par un signal sonore, deviendra actif si un autre appel est actuellement en attente, il deviendra l'appel actif
Rejeter un appel	Double-cliquez sur le bouton décrocher/raccrocher	si un autre appel est déjà actif, il restera actif, seul le nouvel appel entrant, indiqué par un signal sonore, sera rejeté
Transférer un appel commencé sur le téléphone portable vers le Phone Clip+	Appuyez une fois sur le bouton décrocher/raccrocher	
Mettre un appel actif en attente	Appuyez sur le bouton décrocher/raccrocher pendant 2 secondes	si un autre appel est en attente ou si un appel entrant arrive, il deviendra l'appel actif
Recomposition du dernier numéro	Double-cliquez sur le bouton décrocher/raccrocher pendant qu'aucun appel n'est actif ou en attente	si deux téléphones portables sont connectés, cette opération s'applique au dernier téléphone portable couplé



Numérotation vocale	Appuyez sur le bouton décrocher/raccrocher pendant 2 secondes	<p>si deux téléphones portables sont connectés, cette opération s'applique au dernier téléphone portable couplé</p> <p>Cette fonction exige que la fonction de numérotation vocale Bluetooth soit disponible et activée sur votre téléphone Bluetooth</p>
Augmenter ou diminuer le volume de l'interlocuteur	Appuyez sur le signe + sur le côté du Phone Clip+ pour augmenter le volume Appuyez sur le signe - sur le côté du Phone Clip+ pour baisser le volume	
Activer ou désactiver le mode Sourdine des aides auditives pendant un appel téléphonique	Appuyez sur le bouton Sourdine  à l'avant du Phone Clip+	Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la famille d'aides auditives sans fil ReSound Verso

Fonctionnement de la télécommande

Lorsque vous ne parlez pas au téléphone, le Phone Clip+ peut être utilisé comme télécommande simple pour vos aides auditives*.

Réglage du volume

Augmenter le volume de vos aides auditives

Appuyez sur le signe + sur le réglage du volume (6 à la page 9) pour augmenter le volume de vos aides auditives.

Baisser le volume de vos aides auditives

Appuyez sur le signe - sur le réglage du volume (6 à la page 9) pour baisser le volume de vos aides auditives.

Selon le téléphone, vous pouvez aussi utiliser le réglage du volume de votre téléphone portable.

Veillez noter que si vous avez deux aides auditives, changer le volume s'appliquera aux deux appareils à la fois.

Activer ou désactiver le mode Sourdine (Disponible uniquement pour la famille d'aides auditives sans fil ReSound Verso)

* Pour les aides auditives sans fil ReSound Alera : l'utilisation du Phone Clip+ avec la gamme ReSound Alera™ nécessite au préalable un couplage avec la télécommande ReSound Unite™ Remote Control (télécommande de l'utilisateur ou de l'audioprothésiste) pour avoir accès aux fonctions du kit main-libre via la télécommande.

Le mode Sourdine sert à couper l'écoute de l'environnement sonore via les aides auditives pour se concentrer sur la conversation téléphonique. Pour l'activer, appuyez une fois sur le bouton Sourdine (4 à la page 8) sur l'avant du Phone Clip+

Pour désactiver le Mode Sourdine, appuyez une fois sur le bouton Sourdine (4 à la page 8) sur l'avant du Phone Clip+

Changer les programmes de l'aide auditive

Appuyez sur le bouton sélecteur de programme (3 à la page 8) pour changer les programmes directement sur vos aides auditives.

Autonomie

La consommation de la batterie et l'autonomie de votre kit Phone Clip+ dépend largement de votre utilisation.

La batterie de votre Phone Clip+ peut être rechargée des centaines de fois. Si la durée de fonctionnement est réduite de façon importante, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Porter le kit main-libre Phone Clip+

Attachez votre Phone Clip+ sur votre pull, votre veste ou un autre vêtement en veillant à orienter l'entrée du microphone (7 à l'annexe) de façon optimale pour capter votre voix pendant les conversations

téléphoniques. Le Phone Clip+ a une attache pivotante afin que vous puissiez orienter le microphone vers la source sonore.

Pour une captation optimale de la voix, maintenez le dispositif à une distance de 10-30 cm de votre bouche.

Indicateurs lumineux (LED)

L'indicateur lumineux sur le haut de votre Phone Clip+ indique le statut de kit main-libre.

Indicateur lumineux	Etat du kit main-libre
	Fonctionnement normal
	Batterie faible
	Batterie en chargement
	Batterie totalement chargée - Kit main libre connecté au chargeur
	Prêt pour le couplage avec les aides auditives
	Prêt pour l'appairage avec un téléphone Bluetooth
	Appel Bluetooth actif

Présentation de la technologie Bluetooth

Qu'est-ce que Bluetooth ?

Le Bluetooth permet la communication sans fil d'équipements tels que des téléphones mobiles.

Vérifiez que le téléphone que vous souhaitez utiliser avec le kit main-libre fournit la connectivité Bluetooth. Recherchez le symbole suivant sur le dispositif ou son monde d'emploi.



La gamme des applications fournies par un dispositif Bluetooth est définie par des "profils". Le téléphone mobile que vous souhaitez utiliser avec votre Phone Clip+ doit prendre en charge les profils Bluetooth appropriés, à savoir HFP (main libre) ou HSP (casque). C'est le cas de la plupart des téléphones mobiles. Consultez le manuel utilisateur de votre téléphone mobile afin de vérifier sa compatibilité.

La portée Bluetooth

Le Phone Clip+ peut établir une liaison Bluetooth avec un équipement situé à une distance maximale d'environ 10 mètres.

Il n'est pas nécessaire que l'équipement soit directement visible. Néanmoins, les facteurs suivants peuvent restreindre la portée de fonctionnement :

- Présence d'interférences locales
- Portée du téléphone mobile inférieur à celle du Phone Clip+.

Dès que le téléphone mobile sort de cette portée, la connexion sera interrompue. S'il entre à nouveau dans la portée, le kit main libre tentera de rétablir la connexion. Cette opération peut toute fois échouer selon la durée de l'interruption et les caractéristiques du téléphone.

Informations importantes

Entretien et maintenance

- Nettoyez le ReSound Unite Phone Clip+ en utilisant un chiffon humide. N'utilisez jamais de détergents ménagers (lessive, savon, etc...) ou d'alcool pour nettoyer le dispositif.
- Lorsque le ReSound Unite Phone Clip+ n'est pas utilisé, éteignez-le et rangez-le en sécurité.
- Eloignez le ReSound Unite Phone Clip+ de toute source d'humidité (bain, piscine) et de chaleur (radiateur, pare-brise de voiture). Protégez-le contre les chocs et les vibrations.
- Préservez les entrées du microphone et du chargeur de toute poussière ou corps étranger. Au besoin, nettoyez-les à l'aide de la brosse fournie avec vos aides auditives.

Mises en garde

- Conservez le kit main-libre hors de portée des enfants.
- Le ReSound Unite Phone Clip+ utilise des transmissions à codage numérique de faible puissance pour communiquer avec d'autres dispositifs sans fil. Dans de rares cas, le fonctionnement des équipements électroniques situés à proximité peut en être affecté. Éloignez alors le ReSound Unite Phone Clip+ de l'appareil en question.
- Le cas échéant, éloignez le kit main-libre de toute source d'interférences électromagnétiques.

- Évitez d'exposer le kit main-libre à des liquides et à toute autre forme d'humidité susceptibles de l'endommager ou de vous blesser.
- Conservez le kit main-libre et les éventuels câbles à l'écart de toute machine en marche.
- En cas de surchauffe, de chute, d'immersion dans un liquide ou de dommage du kit main-libre, de son câble ou de sa fiche, cessez de l'utiliser et contactez votre audioprothésiste.
- Veuillez mettre le kit main-libre au rebut en respectant les normes et la réglementation en vigueur.
- N'utilisez pas le kit main-libre dans des environnements explosifs.

Atmosphères inflammables

- N'utilisez pas le kit main-libre dans des environnements où il y a un risque de contact avec des gaz inflammables.

Précautions d'emploi

- N'utilisez pas le kit main-libre dans les lieux interdisant l'emploi d'équipements électroniques.
- Les rayons X (par exemple tomodensitométrie, IRM...) peuvent affecter le fonctionnement du kit main-libre. En cas d'examen aux rayons X, éteignez-le et conservez-le à l'extérieur de la salle.
- Les équipements électroniques puissants, les installations électroniques d'envergure, ainsi que les structures métalliques peuvent sensiblement altérer les performances du kit main-libre.
- Si vous constatez des dysfonctionnements dus à un champ-perturbateur, éloignez-vous-en.
- Lors de l'appareillage, un code de communication unique a été attribué à vos aides auditives et au kit main-libre afin que ce dernier n'entrave pas le fonctionnement des appareils portés par des tiers.
- Ne modifiez en aucun cas le kit main-libre.
- Ouvrir le ReSound Unite Phone Clip+ risque de l'endommager. Si des problèmes surgissent et ne peuvent pas être résolus, consultez votre audioprothésiste.
- Le ReSound Unite Phone Clip+ ne peut être réparé que dans un centre de maintenance agréé.

- N'utilisez pas le ReSound Unite Phone Clip+ dans des zones où l'émission de fréquence radio est interdite, par exemple les avions, etc.
- Connectez uniquement le ReSound Unite Phone Clip+ aux connexions prévues spécifiquement à cet effet.

BATTERIE INTÉGRÉE :  Veuillez prendre connaissance des informations ci-dessous

- Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable.
- La batterie neuve ne fonctionne de manière optimale qu'à l'issue de deux à trois cycles de chargement et de déchargement complets.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois. Cependant, ses performances finiront par décliner avec le temps.
- Débranchez le chargeur de la prise électrique et du kit main-libre lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Une batterie se décharge progressivement même lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- L'exposition du kit main-libre à des températures élevées (par exemple dans un véhicule fermé, en été) réduit la capacité et la durée de vie de la batterie.
- Si la batterie est trop froide, elle peut temporairement ne pas fonctionner même lorsque la pile est totalement chargée. Les batteries sont particulièrement sensibles aux températures négatives.

Avertissements relatifs à la batterie 

- "Avertissement" – La batterie du kit main-libre peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise utilisation.
- N'essayez pas d'ouvrir le kit main-libre ou de remplacer la batterie. Celle-ci est intégrée et ne peut pas être remplacée. L'utilisation d'autres batteries peut entraîner un incendie ou une explosion et annule la garantie.
- La batterie de votre kit main-libre ne peut pas être enlevée ni remplacée par l'utilisateur. Ces opérations sont dangereuses et peuvent endommager le kit main-libre.
- Rechargez exclusivement la batterie du ReSound Unite Phone Clip+ avec le module d'alimentation fourni.
- Veuillez recycler dans la mesure du possible.

- Ne jetez pas la batterie dans les déchets ménagers ou dans un feu car elle pourrait exploser.
- Une batterie endommagée présente un risque d'explosion.

ENTRETIEN DU CHARGEUR :  si le produit comporte un chargeur, prenez connaissance des informations ci-dessous.

- N'essayez pas de recharger votre kit main-libre avec un autre chargeur que le chargeur AC fourni. L'emploi de tout autre matériel s'avère dangereux et peut endommager le kit main-libre. Le recours à un chargeur autre que celui fourni avec le produit peut annuler son agrément ou sa garantie.
- Veuillez consulter votre audioprothésiste pour connaître la disponibilité d'éventuelles mises à jour.
- Chargez le produit en respectant les instructions fournies.

Mise en garde relative au chargeur ! 

- Débranchez systématiquement le cordon d'alimentation en tirant sur sa fiche et non sur le cordon lui-même.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.
- N'essayez pas de démonter le chargeur. Cette opération présente des risques de choc électrique.

- Un montage incorrect peut causer un choc électrique ou un incendie.
- Évitez de charger votre produit en présence de températures trop élevées ou trop faibles. N'utilisez pas le chargeur à l'extérieur ni dans des lieux humides.
- Ne chargez pas le ReSound Unite Phone Clip+ lorsque vous le portez sur vous.

Données techniques

Portée de fonctionnement :	jusqu'à 3 m
Sans fil :	2,4 GHz
Température de fonctionnement :	0 à 45 °C
Température de chargement :	0 à 45 °C
Température de stockage :	-20 à 45 °C

Informations sur les tests de température, de transport et de stockage

Ce produit a subi différents essais thermiques et cycliques de chaleur humide entre -25 °C et +70 °C conformément aux normes internes et industrielles en vigueur.

Garantie

Le ReSound Unite Phone Clip+ est garanti par le fabricant pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Notez que certains pays proposent des extensions de garantie. Veuillez contacter votre audioprothésiste pour obtenir davantage d'informations.

Que couvre cette garantie ?

Tout composant électrique qui, en raison de défaut de fabrication ou de conception, ne fonctionne pas correctement pendant une utilisation normale pendant la durée de vie de cette garantie sera remplacé ou réparé sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre, sous réserve de leur retour au point de vente.

S'il est déterminé qu'une réparation n'est pas possible, l'unité entière peut être remplacée par une unité équivalente après accord entre l'audioprothésiste et le client.

Que ne couvre pas cette garantie ?

Les dysfonctionnements résultant d'un usage impropre ou abusif, d'un défaut de soin, d'accidents, de réparations réalisées par une tierce partie non agréée, d'une exposition à un milieu corrosif ou de dommages causés par des corps étrangers à l'intérieur de l'accessoire ne sont PAS couverts par la présente garantie et peuvent entraîner son annulation. La présente garantie n'affecte aucunement les droits que vous pourriez détenir conformément à la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui va au-delà des clauses de cette garantie limitée. Veuillez consulter votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Guide de dépannage

SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE ÉVENTUEL
<i>Le ReSound Unite Phone Clip+ ne répond à aucune pression (longue ou courte) sur le bouton de prise/fin d'appel</i>	La batterie du Phone Clip+ est déchargée	Chargez la batterie
<i>Le bouton de couplage du ReSound Unite Phone Clip+ est enfoncé, aucune mélodie de couplage n'est émise dans l'aide auditive après fermeture du porte-pile</i>	La connexion sans fil entre le kit main-libre et les aides auditives ne s'établit pas	Assurez-vous de respecter la distance de portée entre le kit main-libre et les aides auditives, puis recommencez le couplage
	Le kit main-libre et les aides auditives n'ont pas été en mode couplage simultanément	Répétez la procédure de couplage en veillant à fermer le porte-pile des deux aides auditives dans un délai de 20 secondes après avoir appuyé sur le bouton
<i>Le Phone Clip+ n'est pas détecté par le téléphone portable dans le menu Bluetooth</i>	La connexion sans fil entre le kit main-libre et le téléphone mobile ne s'établit pas	Assurez-vous de respecter la distance de portée entre le kit et le téléphone mobile, puis recommencez l'appairage
	Le Phone Clip+ n'est pas en mode appairage Bluetooth	Le kit main-libre demeure en mode appairage Bluetooth pendant 2 minutes après activation de ce mode. Répétez la procédure d'appairage Bluetooth

Guide de dépannage

SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE ÉVENTUEL
<i>L'appairage Bluetooth a échoué</i>	Le kit main-libre a quitté le mode appairage Bluetooth avant que le téléphone mobile n'ait terminé l'appairage	Répétez la procédure d'appairage Bluetooth en veillant à ce qu'elle ne dure pas plus de 2 minutes une fois le mode correspondant activé sur le kit main-libre
	Le code PIN à 4 chiffres entré est incorrect	Répétez l'appairage Bluetooth et si un code PIN est demandé, entrez 0000 (quatre zéros)
<i>Le téléphone mobile sonne mais l'indicateur lumineux du ReSound Unite Phone Clip+ ne clignote pas et aucune sonnerie n'est émise par les aides auditives</i>	Le Phone Clip+ est éteint	Allumez le Phone Clip+
	Le Phone Clip+ et le téléphone portable n'ont pas été appairés	Effectuez la procédure d'appairage Bluetooth, puis établissez une connexion Bluetooth entre le kit main libre et le téléphone mobile
	La connexion Bluetooth entre le Phone Clip+ et le téléphone portable est perdue	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur le téléphone mobile et établissez à nouveau une connexion Bluetooth entre le téléphone et le kit main-libre en appuyant brièvement sur le bouton de prise d'appel du ReSound Unite Phone Clip+
		Veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone portable pour obtenir des détails sur le fonctionnement Bluetooth

Guide de dépannage

SYMPTÔME	CAUSE	REMÈDE ÉVENTUEL
<i>Le téléphone portable sonne et l'indicateur lumineux sur le Resound Unite Phone Clip+ clignote, mais aucun signal sonore n'est émis dans l'une des aides auditives ou dans les deux</i>	<p>La connexion sans fil entre le kit main-libre et les aides auditives ne s'établit pas</p> <p>Les piles des aides auditives sont épuisées</p>	<p>Assurez-vous de respecter la distance de portée entre le kit main-libre et les aides auditives</p> <p>Remplacez les piles des aides auditives par des piles neuves</p>
<i>L'interlocuteur n'entend pas clairement ma voix</i>	<p>Le microphone du ReSound Unite Phone Clip+ ne capte pas correctement votre voix</p>	<p>Veillez à ce que le microphone du ReSound Unite Phone Clip+ soit placé à proximité de votre bouche et que le Phone Clip+ ne frotte pas contre vos vêtements au cours de la conversation</p>
<i>Le son venant des aides auditives est trop faible ou trop fort</i>	<p>Le niveau d'entrée sonore n'est pas adapté à l'écoute</p>	<p>Réglez le volume à partir du téléphone mobile ou à l'aide des touches "+" et "-" du kit main-libre.</p> <p>Vous pouvez aussi (en option), utiliser les touches "+" et "-" sur la télécommande pour effectuer cette opération</p>
<i>Aucun son n'est transmis par les aides auditives, bien qu'elles soient réglées sur le programme téléphone</i>	<p>La connexion sans fil entre le kit main-libre et les aides auditives ne s'établit pas</p>	<p>Assurez-vous de respecter la distance de portée entre le kit main-libre et les aides auditives</p>

Prêtez particulièrement attention aux informations précédées des symboles suivants



DANGER : indique une situation qui pourrait entraîner des blessures graves,

ATTENTION : indique une situation qui pourrait entraîner des blessures mineures et modérées.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre accessoire ReSound Unite .



L'équipement contient un transmetteur RF.



Produit de type B avec partie appliquée



“Made for iPhone” signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoires avec un iPhone peut affecter les performances sans fil.



Veuillez consulter votre audioprothésiste pour le recyclage de votre accessoire ReSound Unite



Toute question concernant la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et la Directive 1999/5/CEE sur doit être adressée à GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7, DK 2750 Ballerup, Danemark

Siège social mondial

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel. : +45 45 75 11 11
Fax : +45 45 75 11 19
www.resound.com
CVR no. 55082715

France

GN Hearing sas
Zone Silic - Bâtiment léna
1 place des Etats-Unis
94150 Rungis
www.resound.fr

Suisse

GN ReSound AG
Schützenstrasse 1
CH-8800 Thalwil
Tél. : +41 (0)44 722 91 11
Fax : +41 (0)44 722 91 12
info@gnresound.ch
www.resound.ch

Belgique

GN Hearing Benelux BV
Het Hezeland 5-7
Boîte postale 85
NL – 6930 AB Westervoort
Tel : +32 (0)2 513 55 91
Fax : +32 (0)2 502 04 09
info@gnresound.be

ReSound

